


Ligační zařízení PolyLoop (HX-400U-30)

Rychlá referenční příručka

Upozornění: Tato příručka je pouze shrnutím návodu k použití zařízení HX-400U-30 PolyLoop. Nezapomeňte se řídit návodem k použití nástroje Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30, který byl přiložen k zakoupenému zařízení HX-400U-30.

Názvosloví

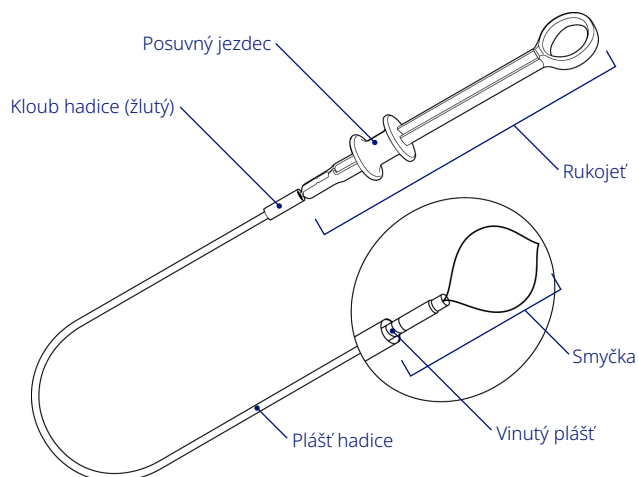


Příprava

1. Zatlačením na kloub hadice distálním směrem vtáhněte smyčku do pláště hadice. Opatrně vložte nástroj do bioptického ventilu.

Používání



2. Tahem za kloub hadice, až se dotýká rukojeti, vysuňte smyčku z pláště hadice.

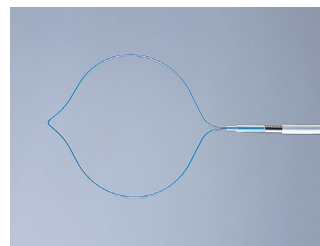

Ligační zařízení PolyLoop (HX-400U-30)


Stručná referenční příručka

Používání (pokračování)

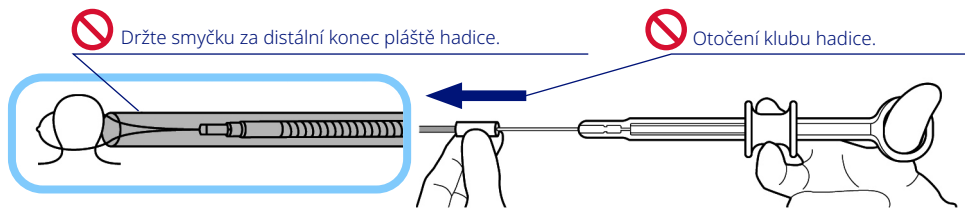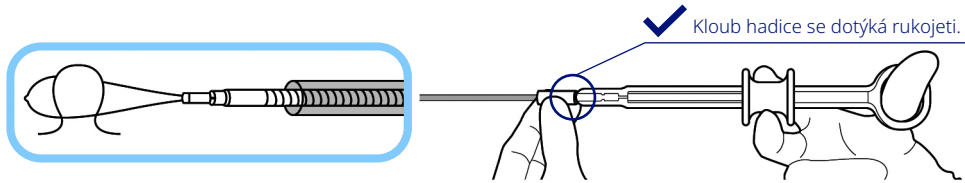

3. Umístěte otevřenou smyčku kolem tkáně. Tahem za posuvný jezdec proveďte ligaci cílové tkáně.


Upozornění: Při ligaci tkáně během zákroku nevyvíjejte na smyčku nepotřebně velkou sílu.

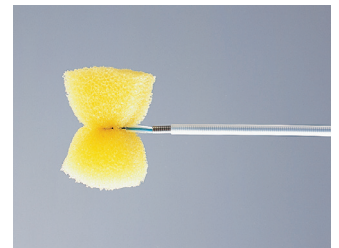

4. Zatlačením na posuvný jezdec až nadoraz vysuňte háček z vinutého pláště. Odpojte smyčku od háčku.

Upozornění: Neodpojujte smyčku od háčku, pokud vinutý plášť není vysunut z pláště hadice.





Upozornění: S proximálním koncem pláště hadice a rukojetí držnými rovně proti bioptickému ventilu endoskopu zatlačte na posuvný jezdec.

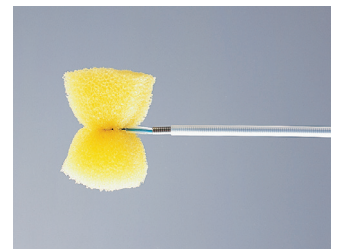

Ligační zařízení PolyLoop (HX-400U-30)

Stručná referenční příručka

Používání (pokračování)

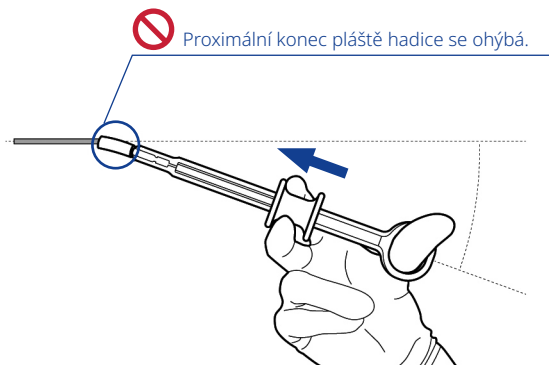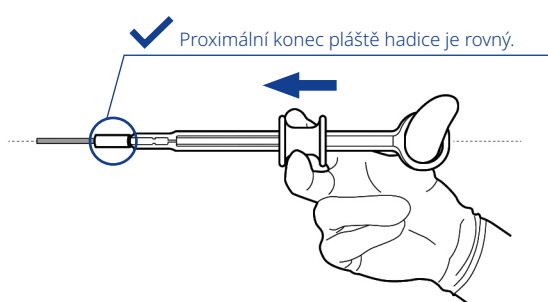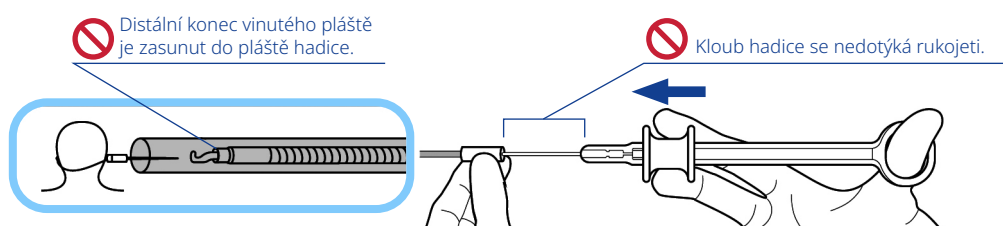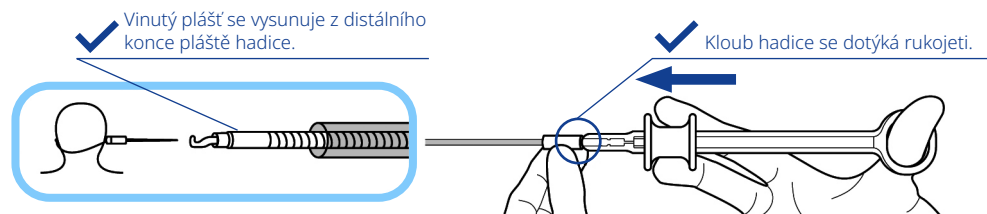

Poznámka: Vždy mějte k dispozici nůžky na smyčku Olympus, kleště a/nebo nůž na drát, abyste mohli přerušit vinutý plášť, plášť hadice a operační drát v případě, že smyčku nelze odpojit od nástroje.



Ligační zařízení PolyLoop (HX-400U-30)


Stručná referenční příručka

Léčení urgentních stavů

Když smyčka nemůže být odpojena od nástroje, postupujte dle návodu uvedeného v této části.


1. Napřimte část endoskopu, která vyčnívá z těla pacienta.

- Napřimte část nástroje, která vyčnívá z bioptického ventilu.
- Zatlačením na posuvný jezdec až nadoraz vysuňte háček z vinutého pláště.

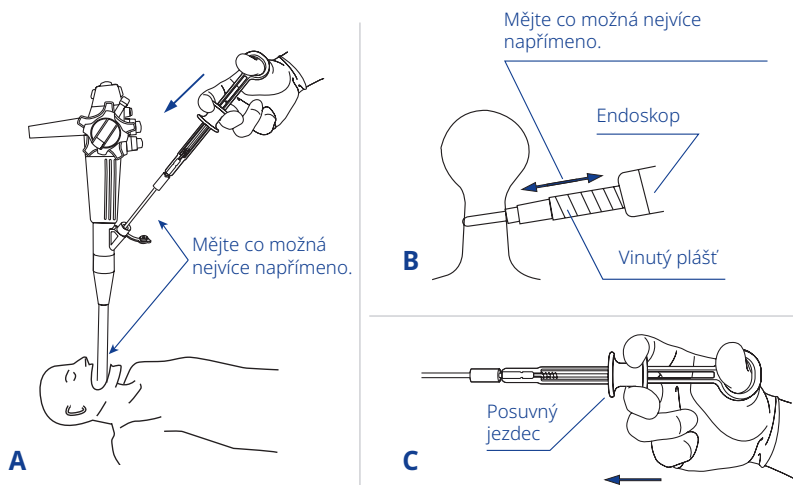


2. Kleštěmi nebo nožem na drát přerušete plášť hadice, vinutý plášť a operační drát.

- Vytáhněte endoskop.

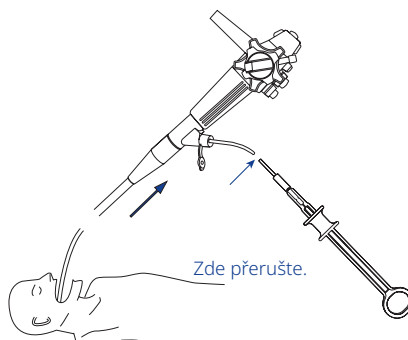

3. Když distální konec vinutého pláště není blízko stoperu smyčky.

- Znovu zavedte endoskop podél pláště hadice.
- Nožem na smyčky Olympus přerušte smyčku.
- Vytáhněte společně plášť hadice, vinutý plášť a operační drát.

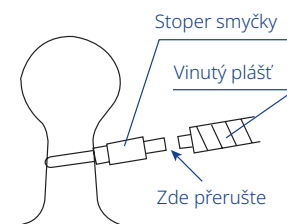

Když distální konec vinutého pláště je blízko stoperu smyčky.

- Ponechte smyčku na místě až do vzniku nekrózy tkáně a dokud se smyčka a tkáň samy neuvolní. To může trvat nějakou dobu.
- Provedte otevřený chirurgický výkon nebo jinou možnou léčbu.

Protože se úroveň medicínských poznatků neustále vyvíjí, může být v budoucnu nutné provést technické úpravy nebo změny v koncepci, specifikaci produktu a jeho příslušenství nebo nabídky služeb.