


PolyLoop-ligationsudstyr (HX-400U-30)

Lynvejledning

Forsigtig: Denne vejledning er kun et sammendrag af brugsanvisningen til HX-400U-30 PolyLoop. Sørg for at følge brugsanvisningen til Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30, som fulgte med dit køb af HX-400U-30.

Nomenklatur

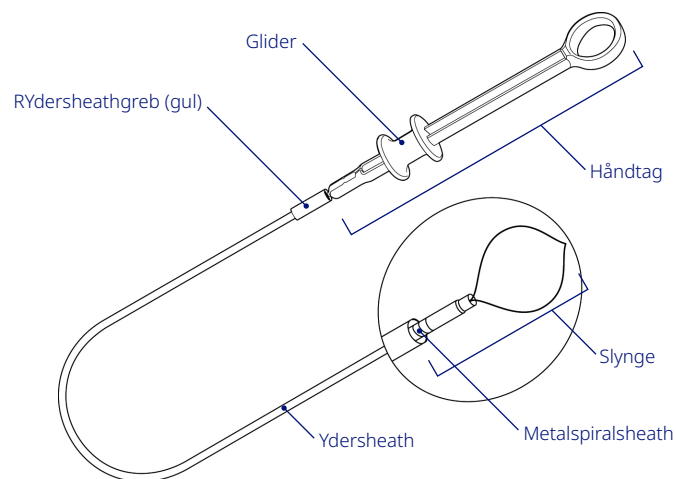


Forberedelse

1. Skub ydersheathgrebet distalt for at trække slyngen ind i ydersheath'en. Før forsigtigt instrumentet ind i biopsiventilen.

Betjening



2. Træk i ydersheathgrebet, indtil den rører ved håndtaget, for at forlænge slyngen fra ydersheath'en.

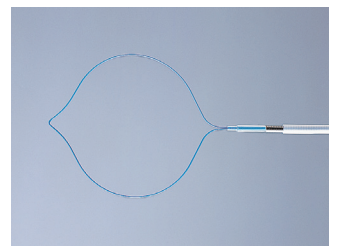

PolyLoop Ligationsudstyr (HX-400U-30)


Lynvejledning

Betjening (fortsat)

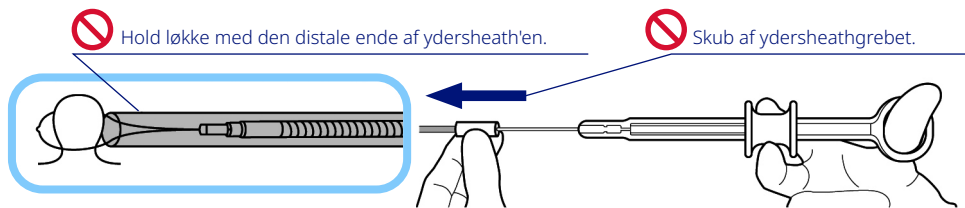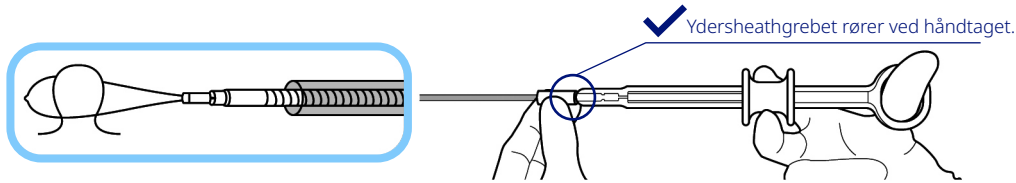

3. Omgiv vævet med den åbne løkke. Træk i glideren for at ligere målvævet.


Forsigtig: Anvend ikke unødvendig kraft på slyngen, når du ligerer væv under proceduren.

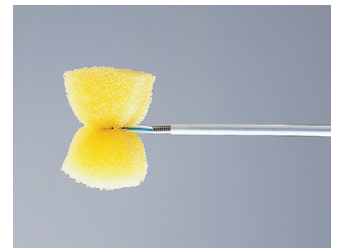

4. Skub glideren, indtil den stopper, for at trække krogen ud af metalspiralsheath'en. Tag slyngen af krogen.

Forsigtig: Fjern ikke slyngen fra krogen, mens metalspiralsheath'en ikke er trukket ud af ydersheath'en.





Forsigtig: Tryk på glideren med den proksimale ende af ydersheath'en og håndtaget holdt lige mod endoskopets biopsiventil.

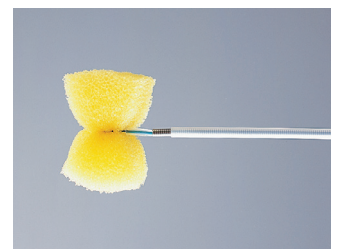

PolyLoop Ligationsudstyr (HX-400U-30)

Lynvejledning

Betjening (fortsat)

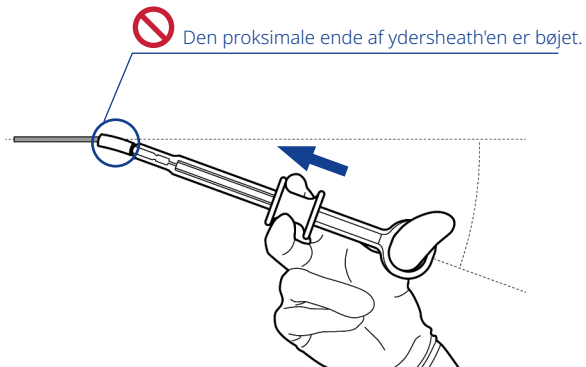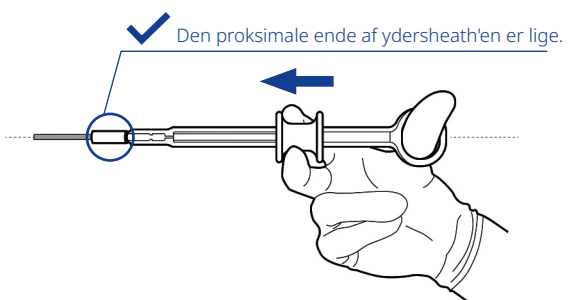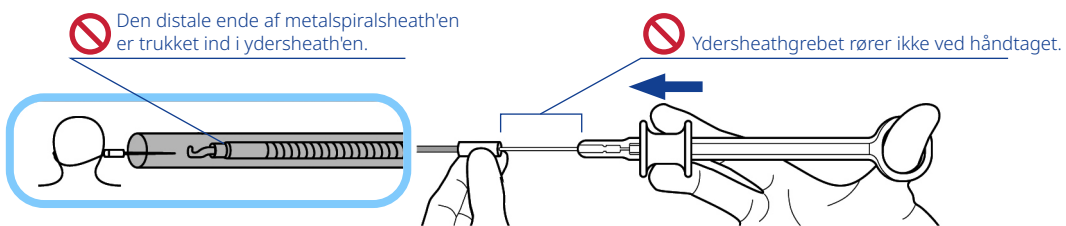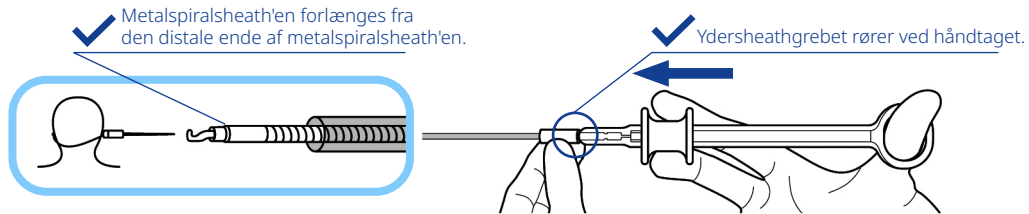

Bemærk: Hav altid Olympus-slyngeskæreren, en tang og/eller en trådsaks klar til at overskære metalspiralsheath'en, ydersheath'en og operationstråden, i tilfælde af at slyngen ikke kan frigøres fra instrumentet.



PolyLoop Ligationsudstyr (HX-400U-30)


Lynvejledning

Nødbehandling

Hvis slyngen ikke kan løsnes fra instrumentet, skal du følge procedurerne beskrevet i dette afsnit.


1. Ret den del af endoskopet ud, som rager ud fra patienten.

- Ret den del af instrumentet ud, der går ud fra biopsiventilen.
- Skub glideren, indtil den stopper, for at trække krogen ud af metalspiralsheath'en.

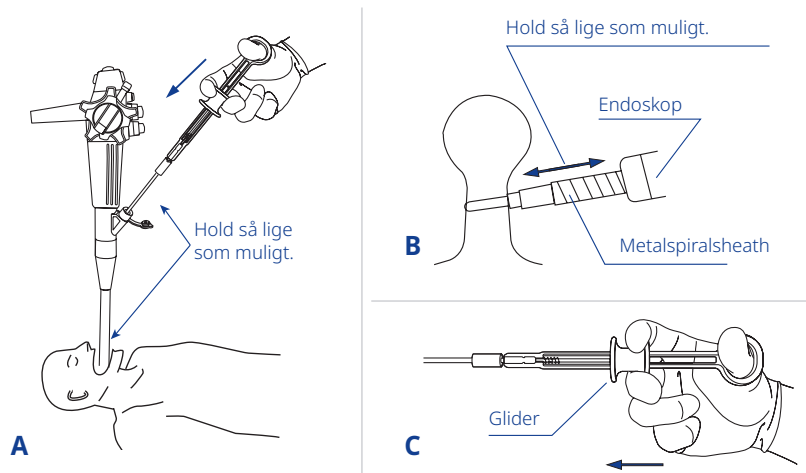


2. Klip ydersheath'en, metalspiralsheath'en og operationstråden over med en tang eller en bidetang.

- Træk endoskopet ud.

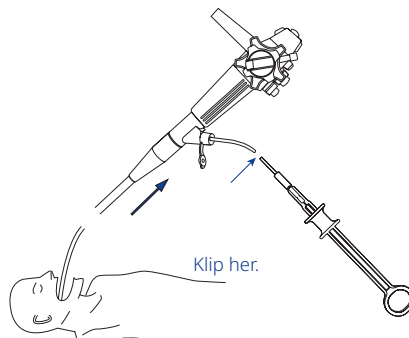

3. Når den distale ende af metalspiralsheath'en ikke er tæt på slyngestopperen.

- Før endoskopet ind igen langs ydersheath'en.
- Klip slyngen over med Olympus-slyngeskæreren.
- Træk ydersheath'en, metalspiralsheath'en og operationstråden ud sammen.

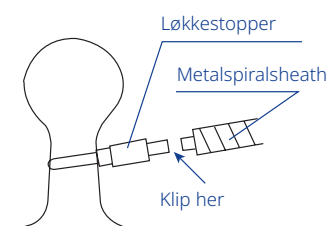

Når den distale ende af ydersheath'en er tæt på slyngestopperen.

- Lad slyngen sidde, indtil der opstår vævsnekrose, og slyngen og vævet løsnes. Dette kan tage et stykke tid.
- Udfør åben kirurgi eller anden mulig behandling.

I takt med udviklingen af vores sundhedsfaglige viden kan det blive nødvendigt at indføre visse tekniske ændringer af produktets design og specifikationer samt tilbehør og serviceydelser.