


PolyLoop Ligaturvorrichtung (HX-400U-30)

Kurzanleitung

Achtung: Bei dieser Anleitung handelt es sich lediglich um eine Zusammenfassung der Gebrauchsanweisung für die PolyLoop HX-400U-30. Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung für die Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30, die Sie beim Kauf der HX-400U-30 erhalten haben.

Terminologie

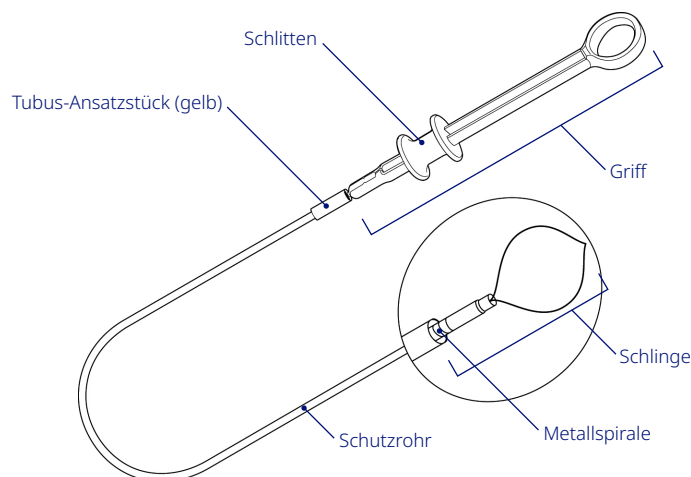


Vorbereitung

1. Schieben Sie das Tubus-Ansatzstück distal vor, um die Schlinge in das Schutzrohr zurückzuziehen. Führen Sie das Instrument vorsichtig in das Biopsieventil ein.

Bedienung


2. Ziehen Sie das Tubus-Ansatzstück zurück, bis es den Griff berührt, um die Schlinge aus dem Schutzrohr auszufahren.

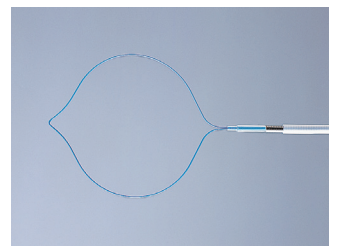

PolyLoop Ligaturvorrichtung (HX-400U-30)



Kurzanleitung

Bedienung (Fortsetzung)

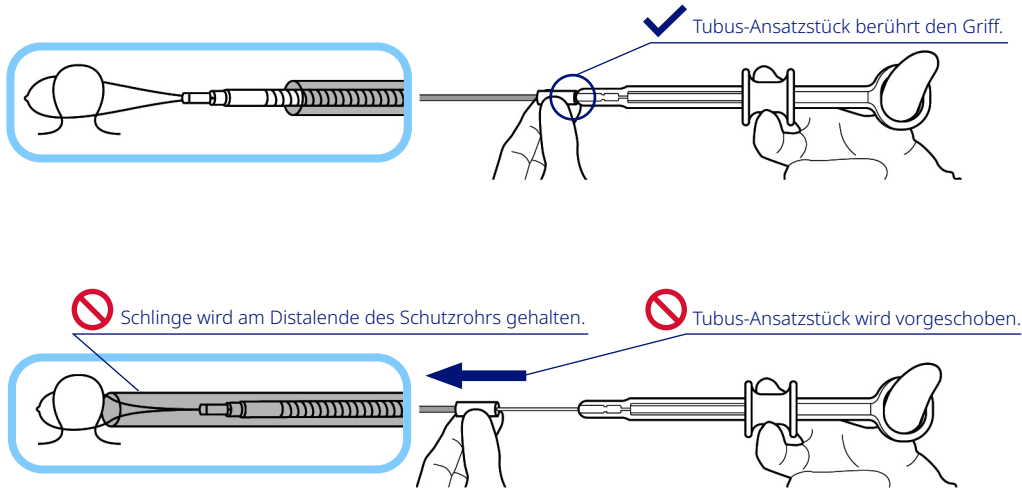

3. Legen Sie die offene Schlinge um das Zielgewebe. Ziehen Sie am Schlitten, um das Zielgewebe zu ligieren.


Achtung: Wenden Sie beim Ligieren von Gewebe während des Verfahrens keine unnötige Kraft auf die Schlinge an.

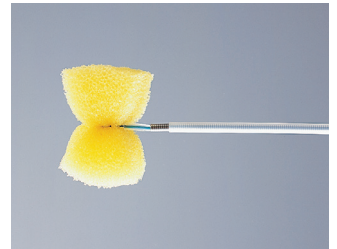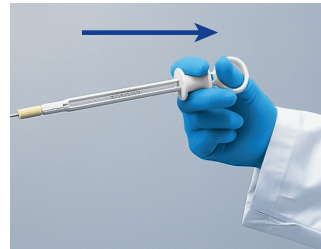

4. Schieben Sie den Schlitten bis zum Anschlag vor, um den Haken aus der Metallspirale auszufahren. Trennen Sie die Schlinge vom Haken.

Achtung: Entfernen Sie die Schlinge nicht vom Haken, solange die Metallspirale nicht aus dem Schutzrohr ausgefahren ist.



Achtung: Halten Sie das proximale Ende des Schutzrohrs und den Griff gerade am Biopsieventil des Endoskops und schieben Sie den Schlitten vor.

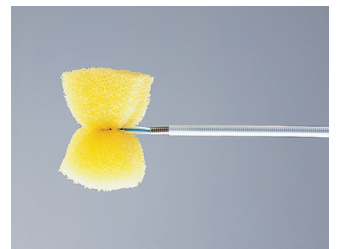

PolyLoop Ligaturvorrichtung (HX-400U-30)

Kurzanleitung

Bedienung (Fortsetzung)

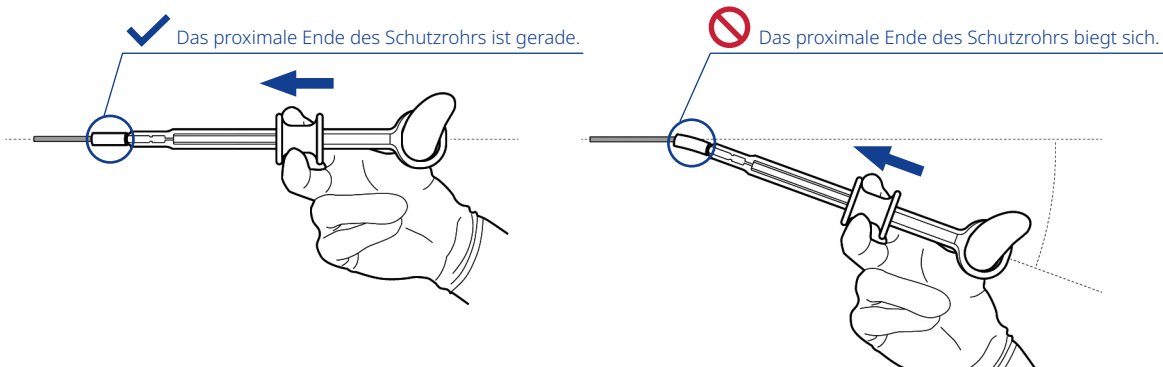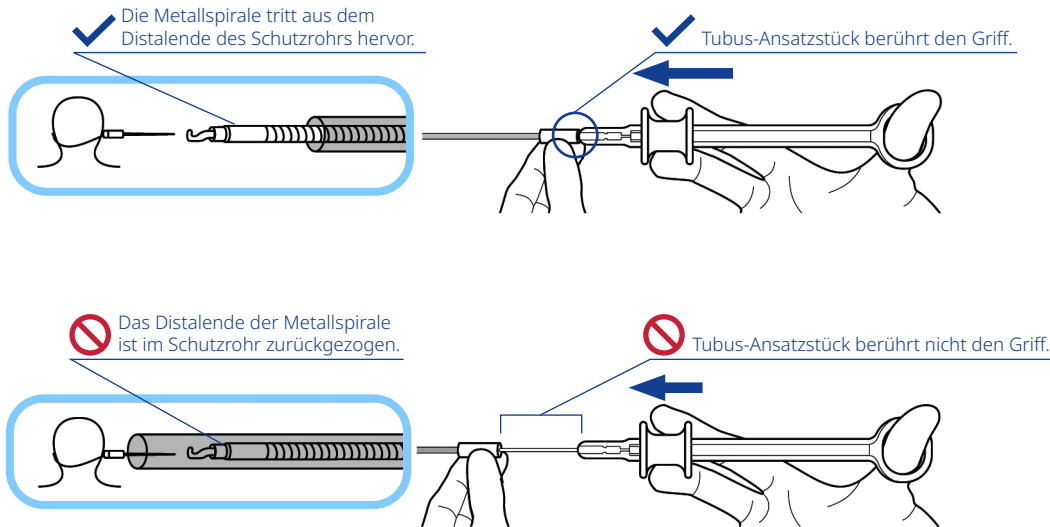

Hinweis: Halten Sie stets den Olympus Loop-Cutter, eine Zange und/oder Drahtschere bereit, um die Metallspirale, das Schutzrohr und den Arbeitsdraht durchzuschneiden, wenn sich die Schlinge nicht vom Instrument lösen lässt.




PolyLoop Ligaturvorrichtung (HX-400U-30)

Kurzanleitung


Notfallbehandlung

Wenn sich die Schlinge nicht vom Instrument trennen lässt, befolgen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren.

1. Begradigen Sie den Teil des Endoskops, der aus der Körperhöhle des Patienten hervortritt.
 - Begradigen Sie den Teil des Instruments, der aus dem Biopsieventil hervortritt.
 - Schieben Sie den Schlitten bis zum Anschlag vor, um den Haken aus der Metallspirale auszufahren.

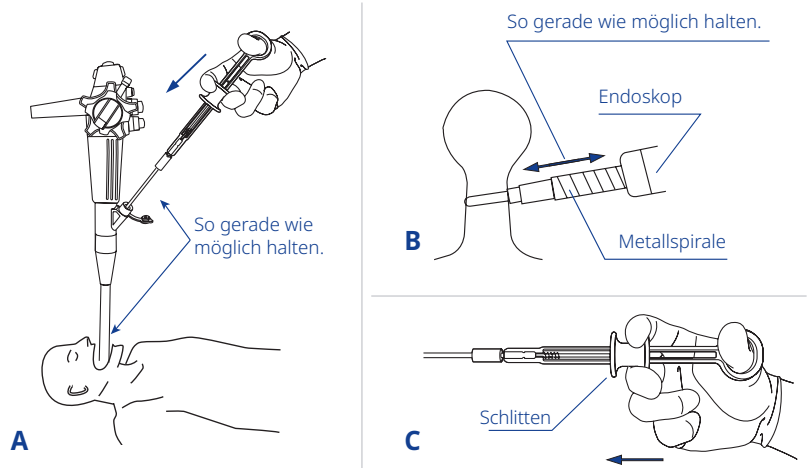


2. Schneiden Sie das Schutzrohr, die Metallspirale und den Arbeitsdraht mit einer Zange oder Drahtschere durch.
 - Ziehen Sie das Endoskop zurück.

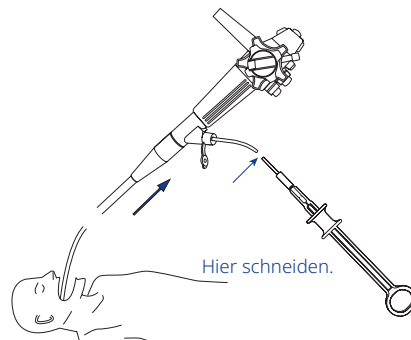

3. Wenn sich das Distalende der Metallspirale nicht nahe am Schlingenstopper befindet.

- Führen Sie das Endoskop erneut entlang des Schutzrohrs ein.
- Schneiden Sie die Schlinge mit dem Olympus Loop-Cutter.
- Ziehen Sie Schutzrohr, Metallspirale und Arbeitsdraht zusammen zurück.

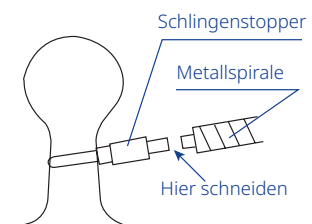

Wenn sich das Distalende der Metallspirale nahe am Schlingenstopper befindet.

- Lassen Sie die Schlinge in ihrer Position, bis eine Gewebenekrose eintritt und Schlinge und Gewebe sich lösen. Dies kann eine gewisse Zeit dauern.
- Führen Sie einen offenen Eingriff oder eine andere mögliche Behandlung durch.

Da das medizinische Wissen ständig wächst, können technische Modifikationen oder Änderungen des Produktdesigns, der Produktspezifikationen, des Zubehörs und des Dienstleistungsangebots erforderlich sein.