


PolyLoop ligeerimisseade (HX-400U-30)

Lühijuhend

Ettevaatust! See juhend on ainult kokkuvõte HX-400U-30 PolyLoopi kasutusjuhendist. Järgige kindlasti Olympuse endoteeraapia PolyLoop HX-400U-30 kasutusjuhendit, mis oli kaasas teie HX-400U-30 ostuga.

Nomenklatuur

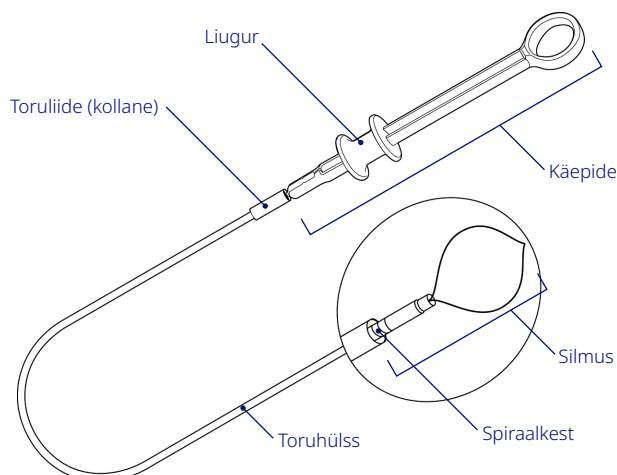


Ettevalmistus

1. Suruge toruliidet distaalselt, et silmus toruhülssi tagasi tõmmata. Sisestage instrument ettevaatlikult biopsiaklappi.

Kasutamine


2. Tõmmake toruliitmikku, kuni see puudutab käepidet, et silmus toruhülssist välja tõmmata.

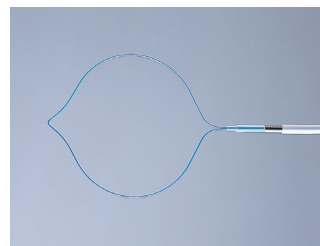

PolyLoop ligeerimisseade (HX-400U-30)


Lühijuhend

Kasutamine (jätkub)

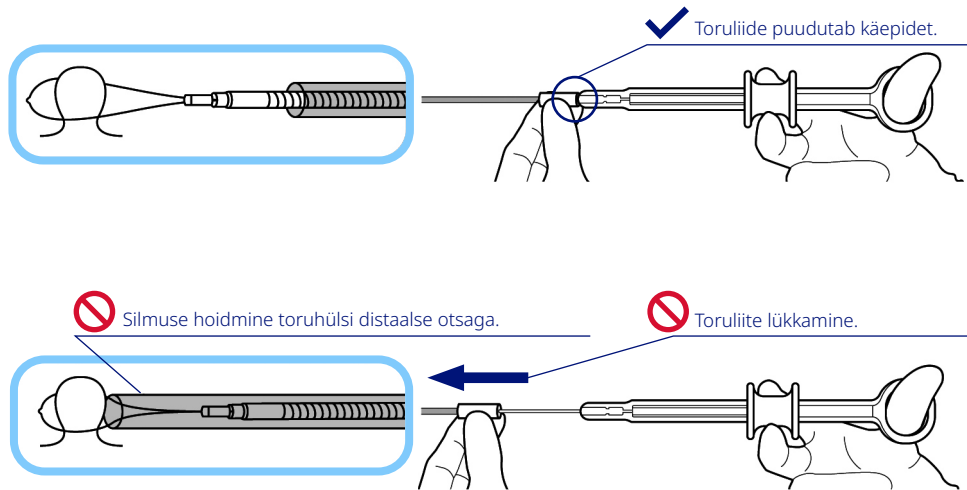

3. Viige avatud silmus koe ümber. Sihtkoe ligeerimiseks tõmmake liugurit.


Ettevaatust! Ärge rakendage protseduuri ajal koe sidumisel silmusele liigset jõudu.

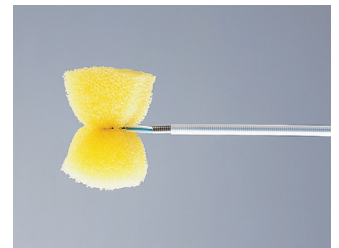

4. Lükake liugurit, kuni see peatub, et konks spiraalkestast välja tõmmata. Eemaldage silmus konksu küljest.

Ettevaatust! Ärge eemaldage silmust konksu küljest, kui spiraalkest ei ole toru ümbrisest välja tõmmatud.





Ettevaatust! Lükake liugurit, hoides toruhülsi proksimaalset otsa ja käepidet otse vastu biopsiaklappi.

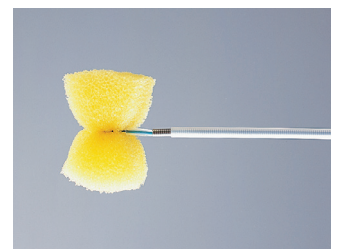

PolyLoop ligeerimisseade (HX-400U-30)

Lühijuhend

Kasutamine (jätkub)

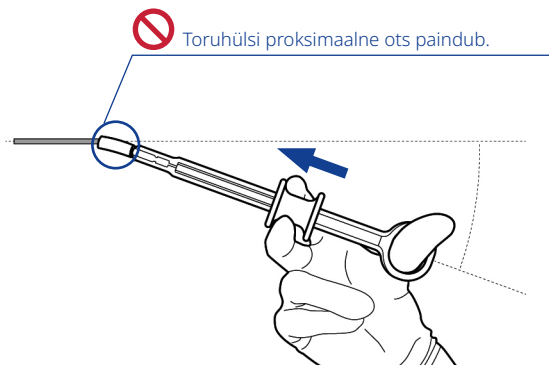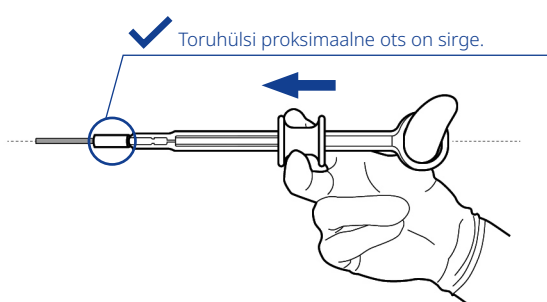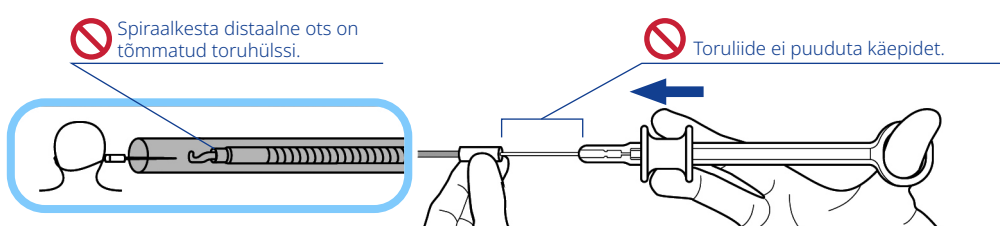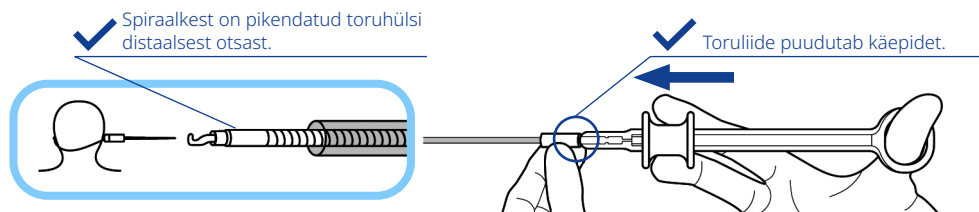

Märkus! Hoidke alati Olympuse silmuselõikur, tangid ja/või traatlõikurid valmis, et lõigata spiraalkeesta, toruhülssi ja juhtetraati, kui silmust ei saa seadmest eemaldada.



PolyLoop ligeerimisseade (HX-400U-30)


Lühijuhend

Erakorraline ravi

Kui silmust ei saa seadmest lahti võtta, järgige selles punktis kirjeldatud protseduure.


1. Sirgendage endoskoobi patsiendist väljaulatuv osa.

- Sirgendage instrumendi osa, mis ulatub biopsiaklapist välja.
- Lükake liugurit, kuni see peatub, et konks spiraalkestast välja tõmmata.

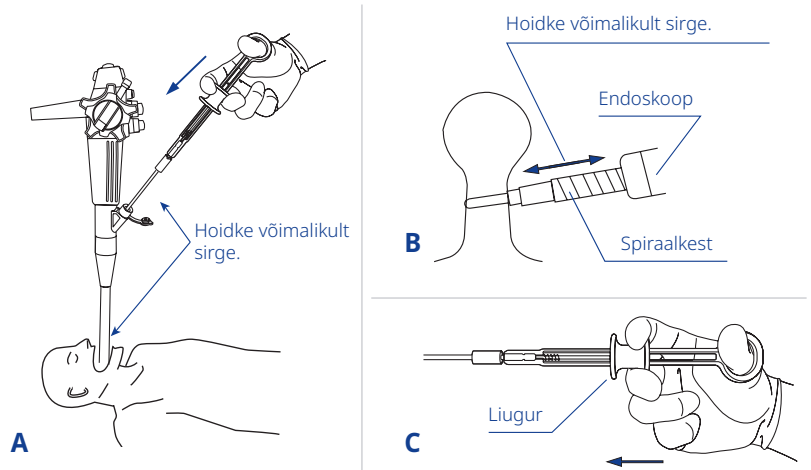


2. Lõigake toruhülssi, spiraalkesta ja juhttraati tangide või traadilõikuriga.

- Tõmmake endoskoop välja.

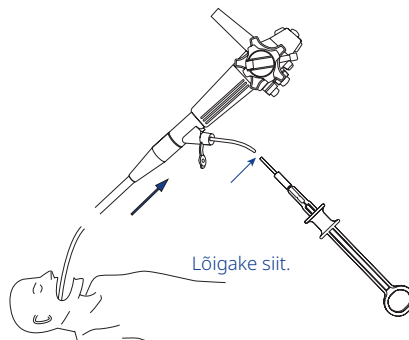

3. Kui spiraalkesta distaalne ots ei ole silmusestopperi lähedal.

- Sisestage endoskoop uuesti mööda toruhülssi.
- Lõigake silmus, kasutades Olympuse silmuselõikurit.
- Tõmmake toruhülss, spiraalkest ja juhttraat koos välja.

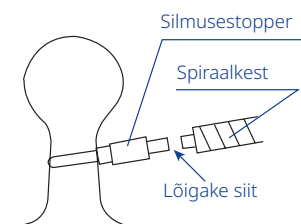

Kui spiraalkesta distaalne ots on silmusestopperi lähedal.

- Jätke silmus paigale, kuni tekib koekärbus ja silmus ning kude vabanevad. See võib võtta aega.
- Viige läbi avatud operatsioon või muu võimalik ravi.

Meditsiinilised teadmised arenevad pidevalt ja seetõttu võivad vajalikud olla toote disaini, tehniliste andmete, tarvikute ja hoolduse tehnilised muudatused või parendused.