


PolyLoop-sidontalaite (HX-400U-30)

Pikaopas

Huomio: Tämä opas on vain tiivistelmä HX-400U-30 PolyLoopin käyttöohjeista. Noudata Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 -laitteen käyttöohjetta, joka on toimitettu HX-400U-30-laitteen oston yhteydessä.

Nimikkeistö

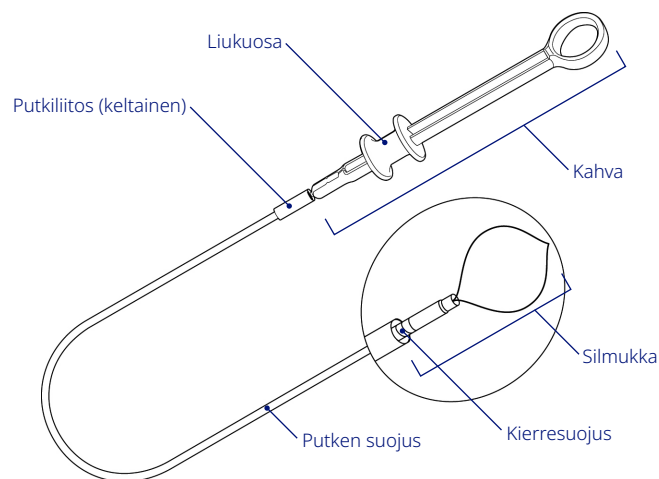


Valmistelu

1. Työnnä putken liitosta distaalisesti vetääksesi silmukan takaisin putken suojukseen. Aseta instrumentti varovasti biopsiaventtiiliin.

Käyttö


2. Vedä putken liitosta, kunnes se koskettaa kahvaa, jotta silmukka tulee ulos putken suojuksesta.

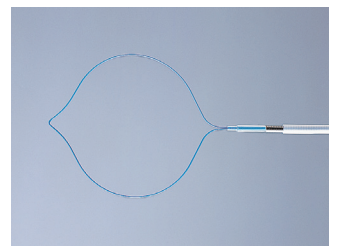

PolyLoop-sidontalaite (HX-400U-30)



Pikaopas

Käyttö (jatkuu)

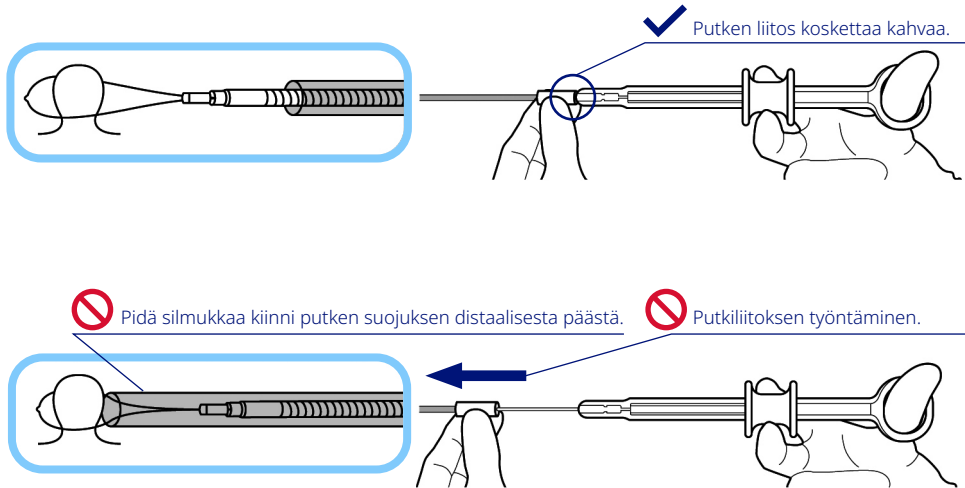

3. Ympäröi kudos avoimella silmukalla. Sido kohdekudos vetämällä liukuosaa.


Huomio: älä kohdista silmukkaan liikaa voimaa, kun sidot kudosta toimenpiteen aikana.

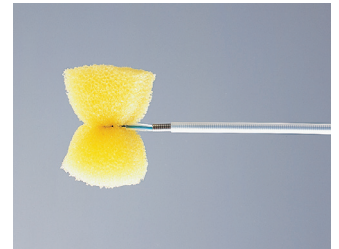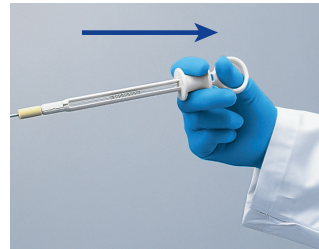

4. Työnnä liukuosaa, kunnes se pysähtyy, jotta koukku tulee ulos kierresuojuksesta. Irrota silmukka koukusta.

Huomio: älä irrota silmukkaa koukusta, kun kierreholkki ei ole tullut ulos putken suojuksesta.





Huomio: Työnnä liukuosaa, kun putken suojuksen ja kahvan proksimaalinen pää on suoraan endoskoopin biopsiaventtiiliä vasten.

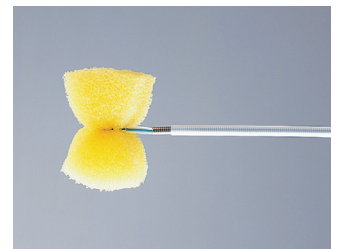

PolyLoop-sidontalaite (HX-400U-30)

Pikaopas

Käyttö (jatkuu)

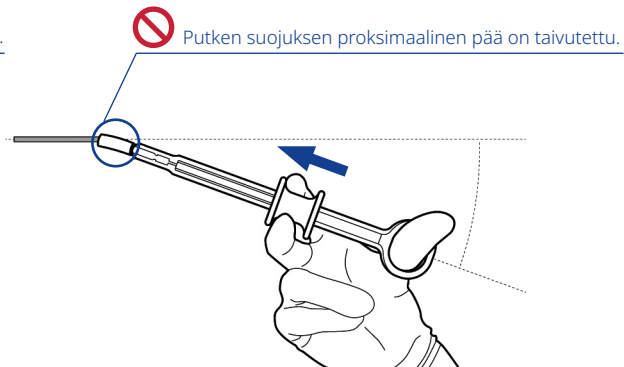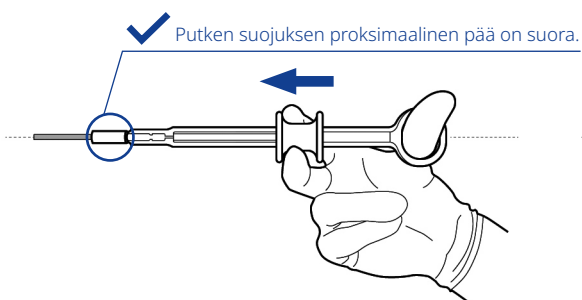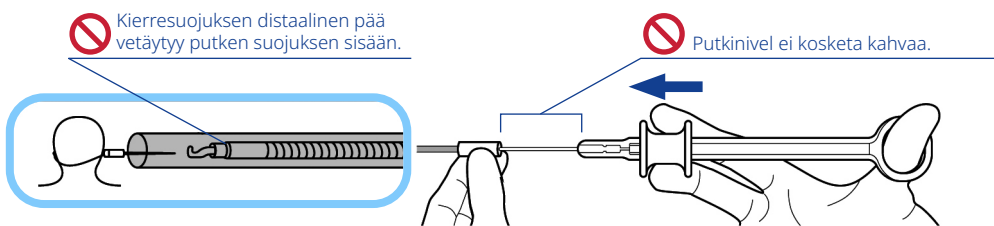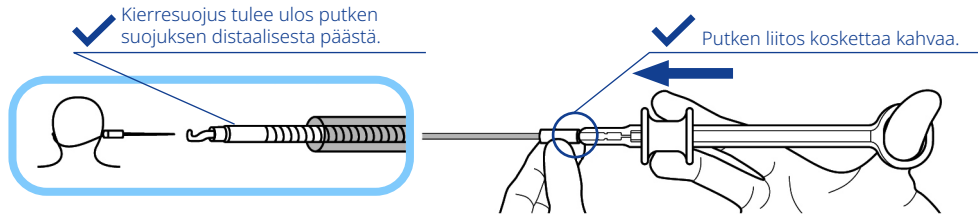

Huomautus: Pidä aina Olympuksen silmukkaleikkuri, pihdit ja/tai lankaleikkurit valmiina leikkaamaan kierresuojus, putken suojuksen ja käyttölangan siltä varalta, että silmukkaa ei voida irrottaa laitteesta.



PolyLoop-sidontalaite (HX-400U-30)


Pikaopas

Hätätilahoito

Jos silmukkaa ei voida irrottaa laitteesta, noudata tässä osassa kuvattuja menettelyjä.


1. Suorista endoskoopin se osa, joka ulottuu potilaan ulkopuolelle.

- Suorista instrumentin osa, joka tulee ulos biopsiaventtiilistä.
- Työnnä liukusäädintä, kunnes se pysähtyy, jotta koukku voidaan ojentaa ulos kierresuojuksesta.

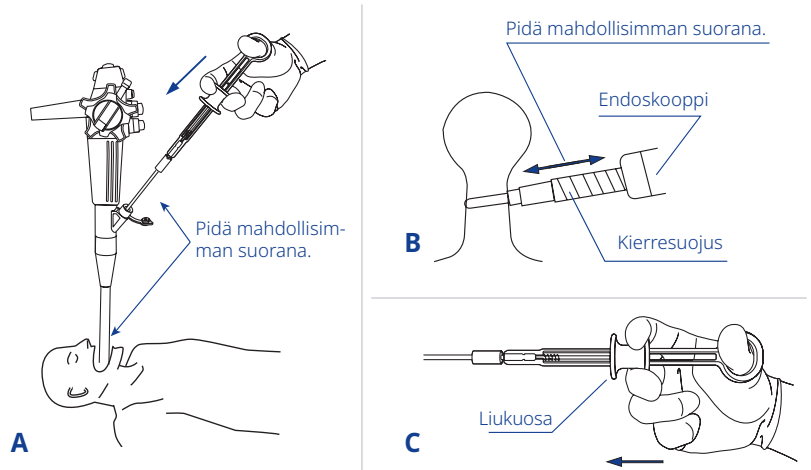


2. Leikkaa putken suojus, kierresuojus ja leikkauslanka pihdeillä tai lankaleikkureilla.

- Vedä endoskooppi pois.

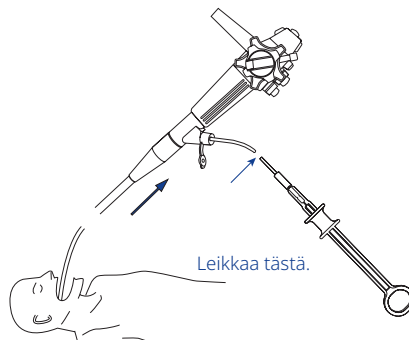

3. Kun kierresuojuksen distaalinen pää ei ole lähellä silmukan pysäytintä.

- Aseta endoskooppi uudelleen putken suojusta pitkin.
- Leikkaa silmukka Olympuksen silmukkaleikkurilla.
- Vedä putken suojus, kierresuojus ja leikkauslanka yhdessä ulos.

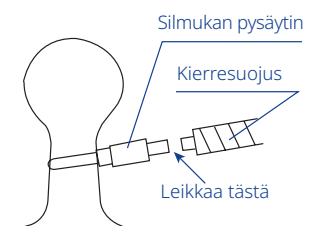

Kun kierresuojuksen distaalinen pää on lähellä silmukan pysäytintä.

- Jätä silmukka paikalleen, kunnes kudokset menevät kuolioon ja silmukka ja kudokset irtoavat. Tämä voi kestää jonkin aikaa.
- Tee avoleikkaus tai muu mahdollinen hoito.

Koska lääketieteellinen tietämys lisääntyy jatkuvasti, tuotteen rakenteeseen, määrittelyihin, lisävarusteisiin ja palvelutarjontaan voi olla tarpeen tehdä teknisiä muutoksia.