


Uređaj za podvezivanje PolyLoop (HX-400U-30)

Vodič s kratkim uputama

Opresz: ovaj je vodič samo sažetak uputa za uporabu za HX-400U-30 PolyLoop. Slijedite korisnički priručnik za Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 koji je priložen uz vaš kupljeni proizvod HX-400U-30.

Nazivlje

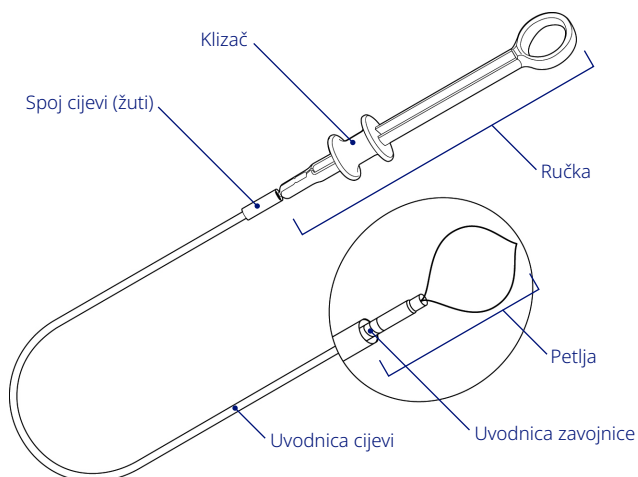


Priprema

1. Distalno gurajte spoj cijevi kako biste uvukli petlju u uvodnicu cijevi. Pažljivo uvedite instrument u ventil za biopsiju.

Rad


2. Povlačite spoj cijevi dok ne dodirne ručku kako biste izvukli petlju iz uvodnice cijevi.

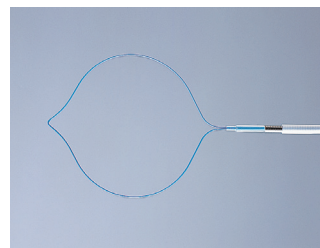

Uređaj za podvezivanje PolyLoop (HX-400U-30)


Vodič s kratkim uputama

Rad (nastavak)

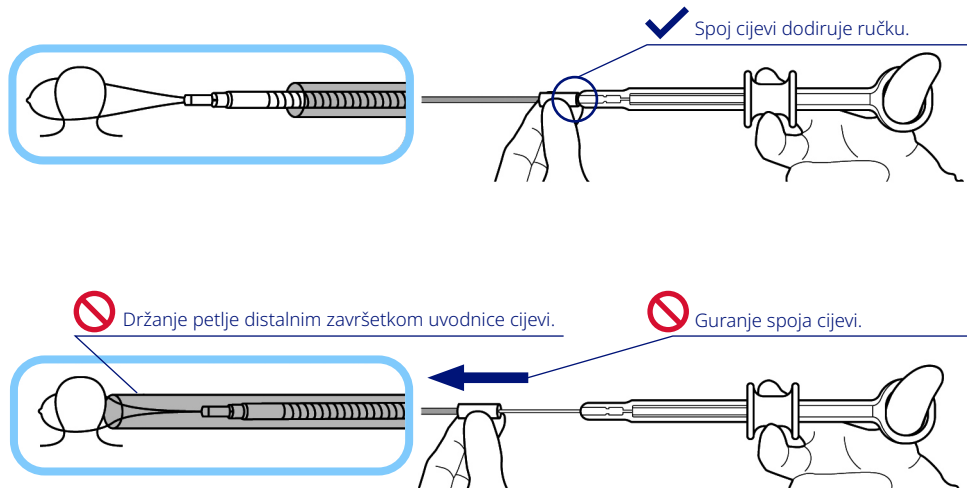

3. Otvorenu petlju postavite oko tkiva. Povucite klizač kako biste podvezali ciljno tkivo.


Oprez: pri podvezivanju tkiva tijekom postupka nemojte primjenjivati nepotrebnu silu na petlju.

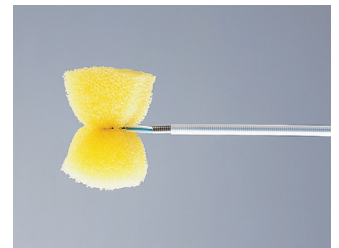

4. Gurajte klizač dok se ne zaustavi kako biste izvukli kuku iz uvodnice zavojnice. Odvojite petlju od kuke.

Oprez: petlju nemojte odvajati od kuke dok uvodnica zavojnice nije izvučena iz uvodnice cijevi.





Oprez: držeći proksimalni završetak uvodnice cijevi i ručku ravno uz ventil za biopsiju endoskopa, gurajte klizač.

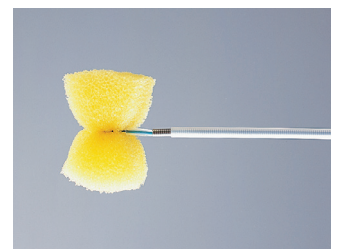

Uređaj za podvezivanje PolyLoop (HX-400U-30)

Vodič s kratkim uputama

Rad (nastavak)

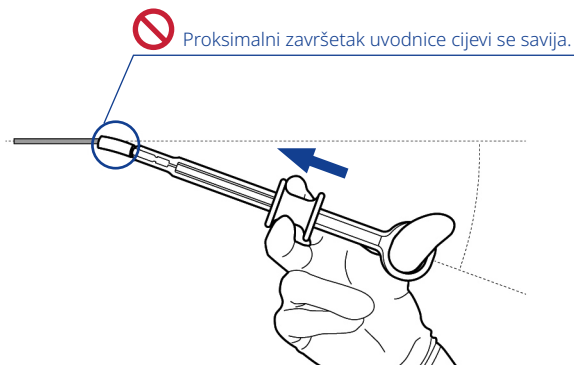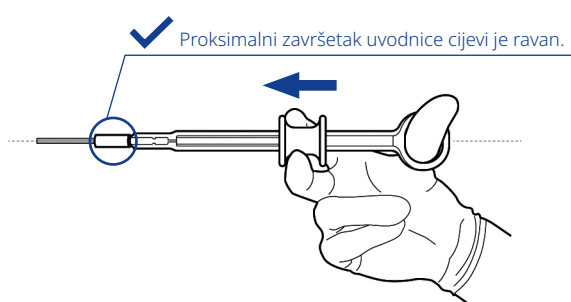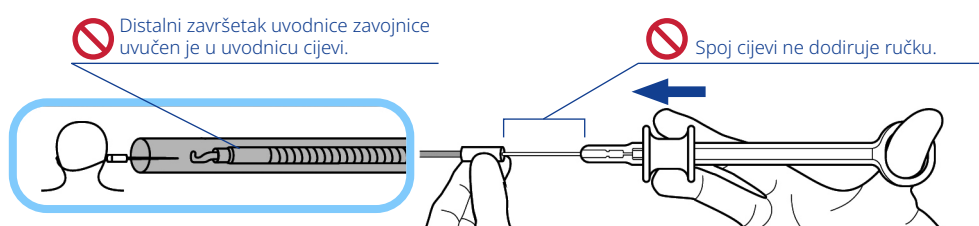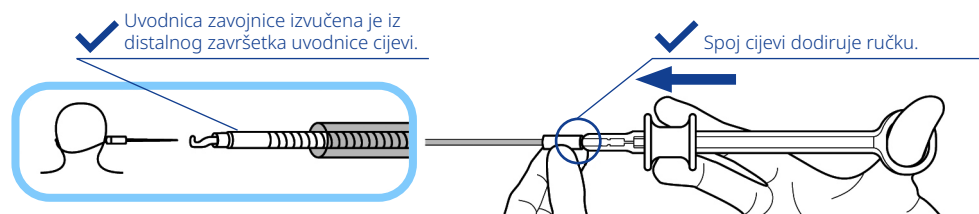

Napomena: uvijek imajte pri ruci Olympusov rezač petlji, kliješta i/ili rezač žice za rezanje uvodnice zavojnice, uvodnice cijevi i operacijske žice u slučaju da se petlja ne može odvojiti od instrumenta.



Uređaj za podvezivanje PolyLoop (HX-400U-30)


Vodič s kratkim uputama

Hitno liječenje

Ako se petlja ne može odvojiti od instrumenta, pratite postupke koji su opisani u ovom odjeljku.


1. Izravnajte dio endoskopa koji izlazi iz pacijenta.

- Izravnajte dio instrumenta koji izlazi iz ventila za biopsiju.
- Gurajte klizač dok se ne zaustavi kako biste izvukli kuku iz uvodnice zavojnice.

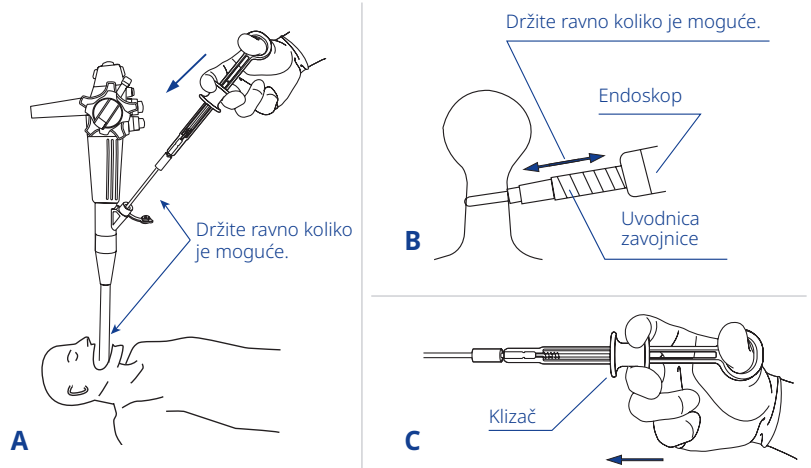


2. Odrežite uvodnicu cijevi, uvodnicu zavojnice i operacijsku žicu klišetima ili rezačem žice.

- Izvadite endoskop.

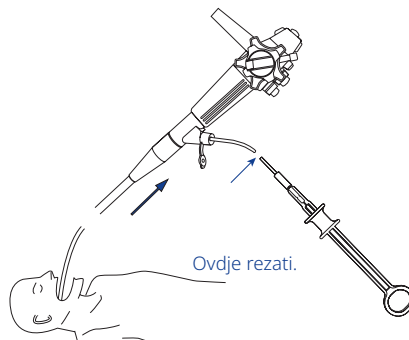

3. Kada distalni završetak uvodnice zavojnice nije blizu graničnika petlje.

- Umetnite endoskop ponovno uz uvodnicu cijevi.
- Odrežite petlju pomoću Olympusova rezača petlji.
- Zajedno izvadite uvodnicu cijevi, uvodnicu zavojnice i operacijsku žicu.

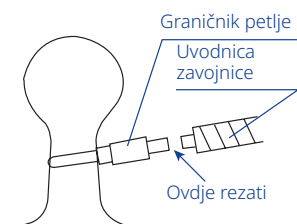

Kada je distalni završetak uvodnice zavojnice blizu graničnika petlje.

- Ostavite petlju na mjestu dok ne nastupi nekroza tkiva i petlja i tkivo se ne oslobode. To može potrajati.
- Izvedite otvoreni kirurški zahvat ili drugo odgovarajuće liječenje.

Kako se medicinsko znanje neprestano širi, mogu biti potrebne tehničke izmjene ili promjene dizajna proizvoda, specifikacija proizvoda, pribora i ponude usluga.