


Dispositivo di legatura PolyLoop (HX-400U-30)

Guida di riferimento rapido

Attenzione: la presente guida è solo una sintesi delle istruzioni per l'uso di HX-400U-30 PolyLoop. Assicurarsi di seguire il manuale di istruzioni di Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 incluso con l'acquisto di HX-400U-30.

Terminologia

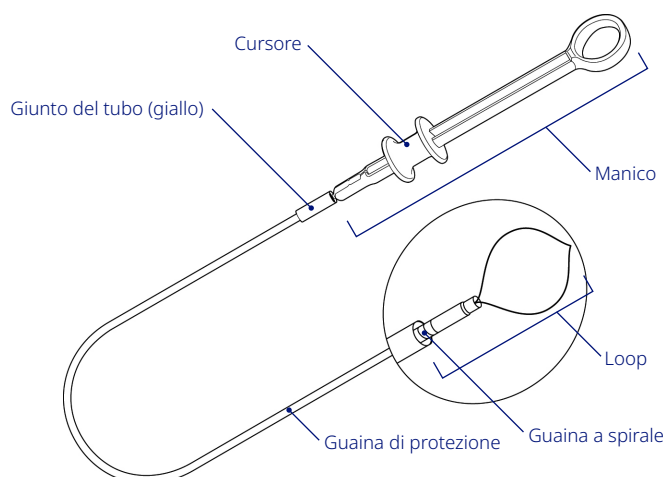


Preparazione

1. Per ritrarre il loop nella guaina di protezione, spingere il giunto del tubo in direzione distale. Inserire attentamente il dispositivo nella valvola biottica.

Funzionamento


2. Tirare il giunto del tubo fino a far toccare il manico, così da far sporgere il loop dalla guaina di protezione.

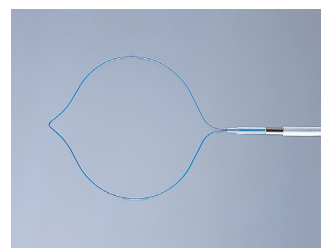

Dispositivo di legatura PolyLoop (HX-400U-30)


Guida di riferimento rapida

Funzionamento (continua)

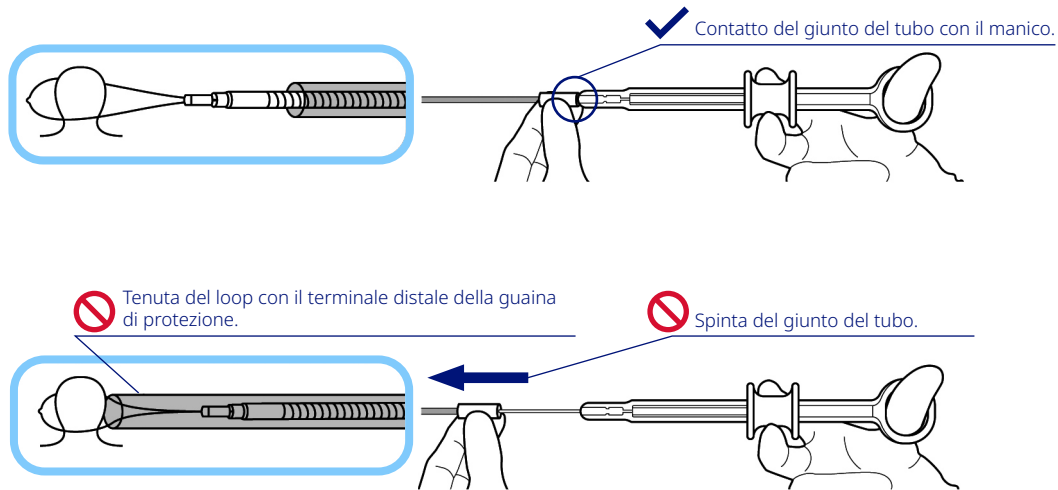

3. Circondare il tessuto con il loop aperto. Tirare il cursore per legare il tessuto da trattare.


Attenzione: non esercitare una forza eccessiva sul loop durante la legatura dei tessuti nel corso della procedura.

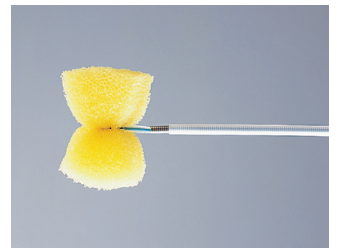

4. Spingere il cursore fino a quando non si arresta per far sporgere il gancio dalla guaina a spirale. Staccare il loop dal gancio.

Attenzione: non rimuovere il loop dal gancio quando la guaina a spirale non sporge dalla guaina di protezione.




Attenzione: tenendo il terminale prossimale della guaina di protezione e il manico ben aderenti alla valvola biottica dell'endoscopio, spingere il cursore.

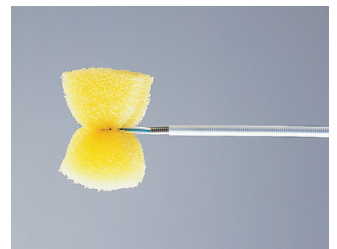

Dispositivo di legatura PolyLoop (HX-400U-30)

Guida di riferimento rapida

Funzionamento (continua)

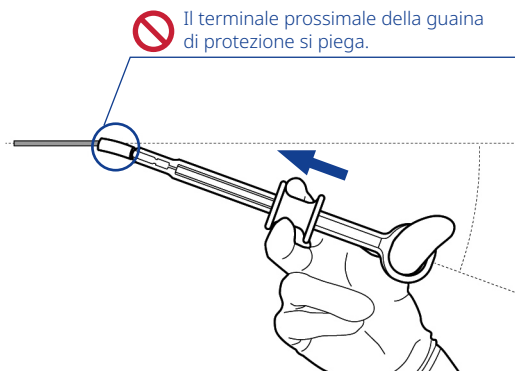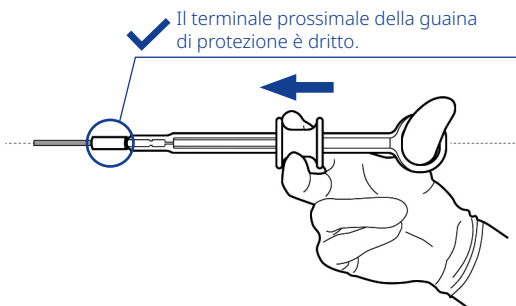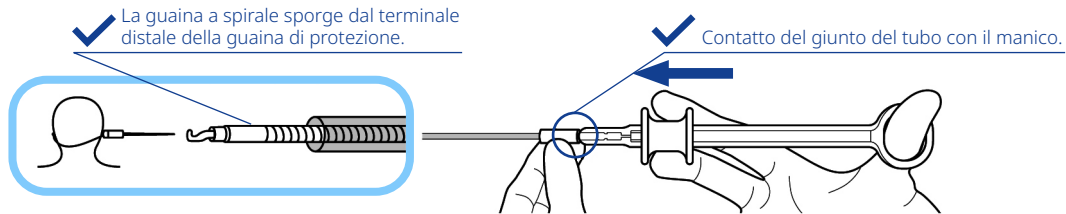

Nota: tenere sempre a disposizione Loop Cutter Olympus, pinze e/o cutter per filo metallico per tagliare la guaina a spirale, la guaina di protezione e il cavo operativo qualora non fosse possibile staccare il loop dallo strumento.



Dispositivo di legatura PolyLoop (HX-400U-30)


Guida di riferimento rapida

Trattamento di emergenza

Se non è possibile staccare il loop dal dispositivo, seguire le procedure descritte nella presente sezione.


1. Raddrizzare il tratto di endoscopio che sporge dal paziente.

- Raddrizzare il tratto di dispositivo che sporge dalla valvola biptica.
- Spingere il cursore fino a quando non si arresta per far sporgere il loop dalla guaina a spirale.

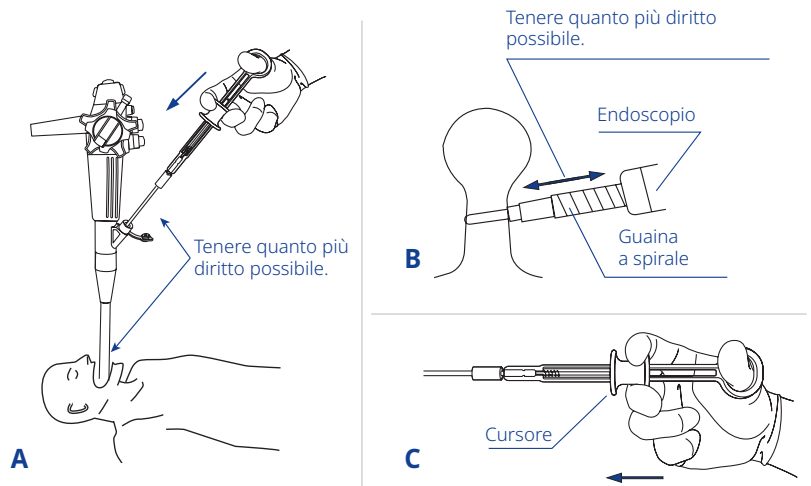


2. Tagliare la guaina di protezione, la guaina a spirale e il cavo operativo utilizzando pinze idonee o un cutter per filo metallico.

- Estrarre l'endoscopio.

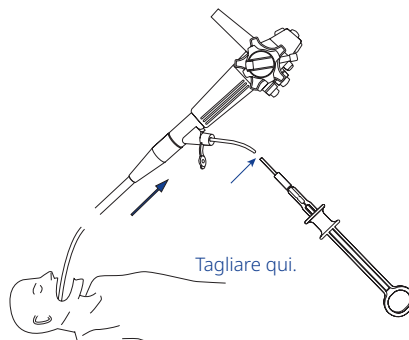

3. Quando il terminale distale della guaina a spirale non è vicino al blocco di arresto del loop.

- Reinserire l'endoscopio lungo la guaina di protezione.
- Tagliare il loop utilizzando il Loop Cutter Olympus.
- Estrarre contemporaneamente la guaina di protezione, la guaina a spirale e il filo operativo.

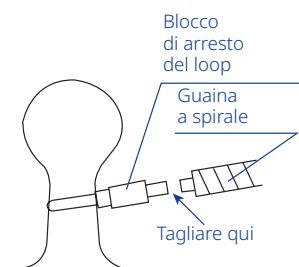

Quando il terminale distale della guaina a spirale è vicino al blocco di arresto del loop.

- Lasciare il loop in posizione fino a quando non si verifica la necrosi dei tessuti e il loop e il tessuto si staccano. Per ottenere la necrosi potrebbe occorrere un certo lasso di tempo.
- Eseguire un intervento di chirurgia aperta o un altro trattamento possibile.

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, potrebbero essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.