


PolyLoop лигациялау құрылғысы (HX-400U-30)

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Назар аударыңыз: бұл нұсқаулық HX-400U-30 PolyLoop құрылғысының пайдалану нұсқауларының қысқаша мазмұны ғана болып табылады. HX-400U-30 құрылғысын сатып алғанда жинақпен бірге берілген Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 пайдалану нұсқаулығын міндетті түрде орындаңыз.

Номенклатура

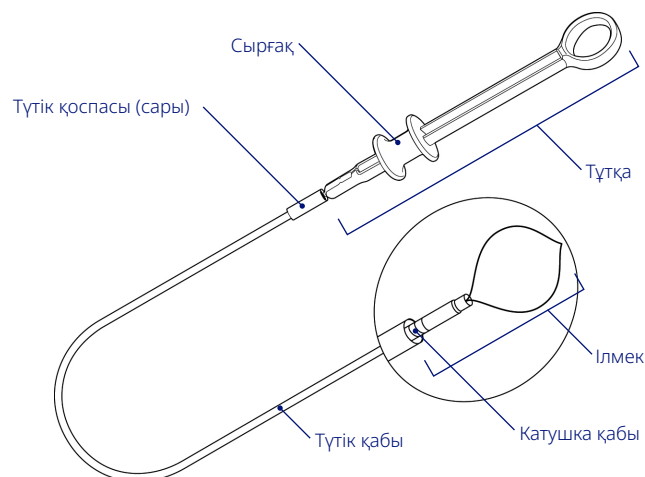


Дайындық

1. Ілмекті түтік қабына тарту үшін түтік қоспасын алшақ басыңыз. Құралды биопсия клапанына абайлап салыңыз.

Пайдалану


2. Ілмекті түтік қабынан шығару үшін түтік қоспасын тұтқаға тигенше тартыңыз.

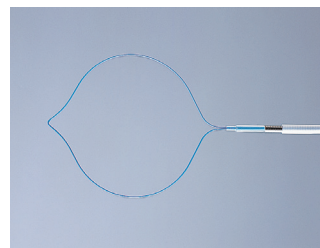

PolyLoop лигациялау құрылғысы (НХ-400U-30)


Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Пайдалану (жалғасы)

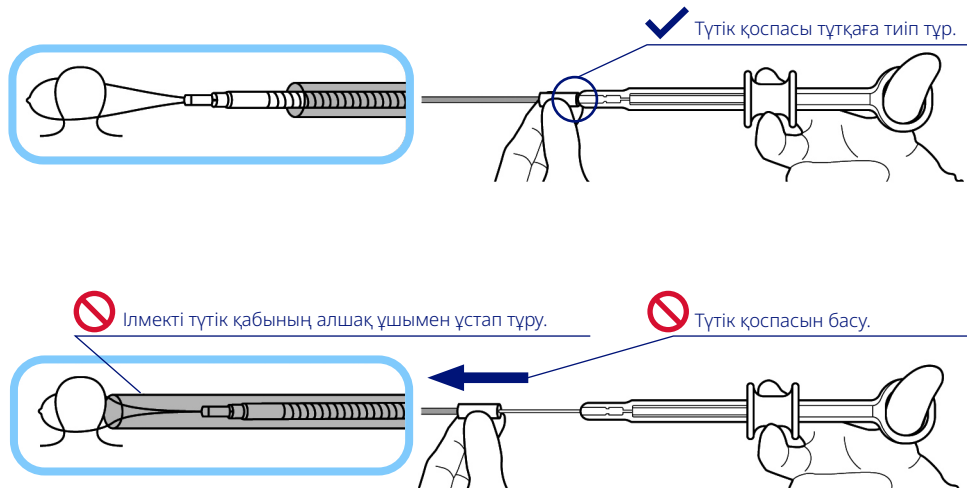

3. Тінді ашық ілмекпен ораңыз. Мақсатты тінді лигациялау үшін сырғақты тартыңыз.


Назар аударыңыз: процедура барысында тінді лигациялау кезінде ілмекке артық күш түсіруге болмайды.

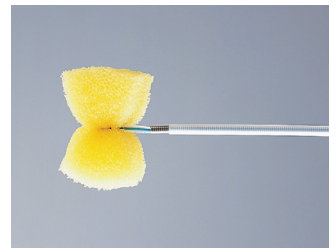

4. Ілгекті катушка қабынан шығару үшін сырғақты тірелгенше тартыңыз. Ілмекті ілгектен ажыратыңыз.

Назар аударыңыз: катушка қабы түтік қабынан шығарылмай тұрып, ілмекті ілгектен алып тастауға болмайды.


Назар аударыңыз: түтік қабының жақын ұшы мен тұтқаны эндоскоптың биопсия клапанына тікелей басып тұрып, сырғақты басыңыз.

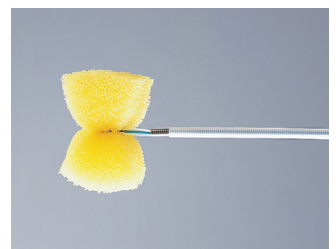

PolyLoop лигациялау құрылғысы (НХ-400U-30)

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Пайдалану (жалғасы)

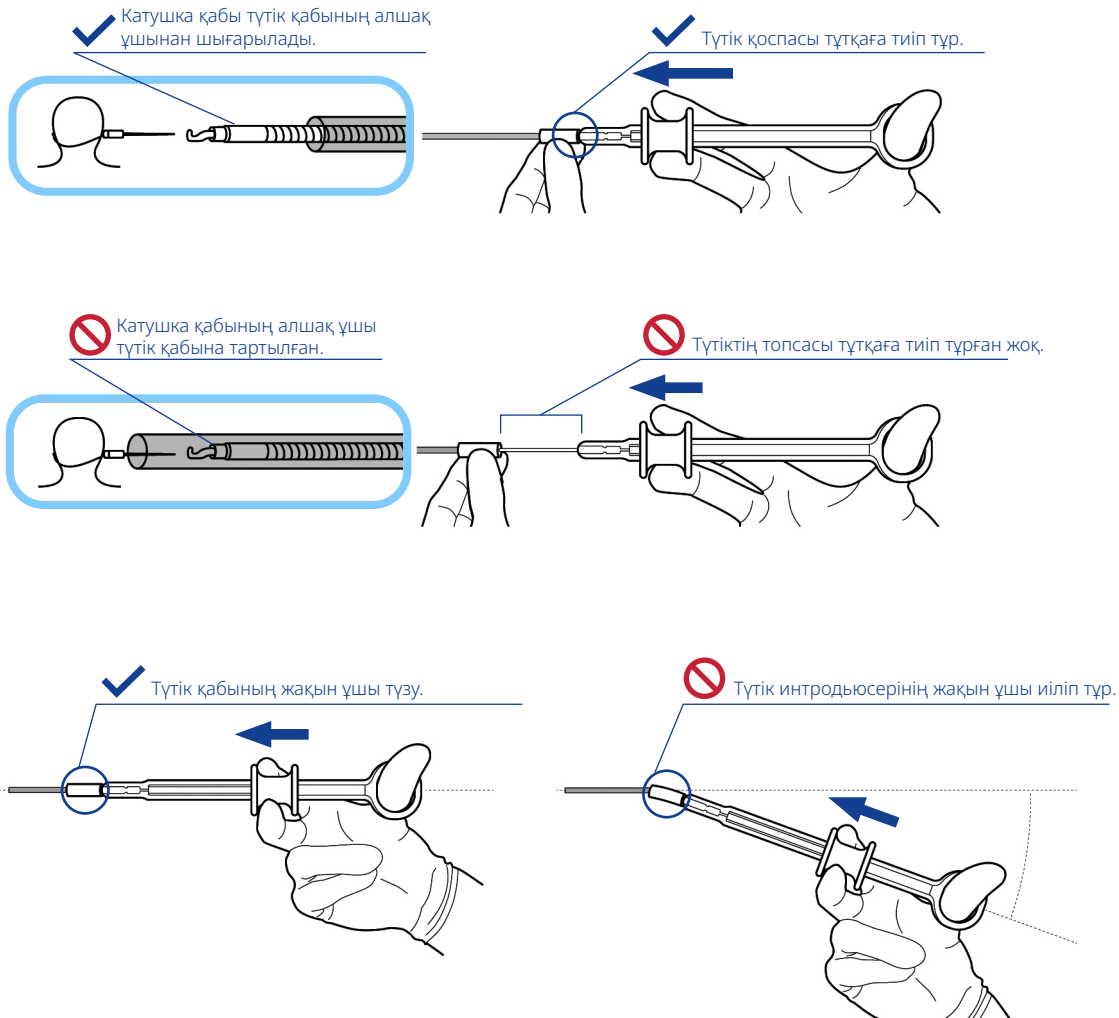

Ескерту: ілмекті құралдан ажырату мүмкін болмаған жағдайда катушка қабын, түтік қабын және операциялық сымды кесу үшін Olympus ілмекті кескіші, тістеуігі және/немесе сым кескіші әрдайым болсын.



PolyLoop лигациялау құрылғысы (НХ-400U-30)


Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Жедел жәрдем

Егер ілмекті құралдан ажырату мүмкін болмаса, осы бөлімдегі сипаттамада берілген процедураларды орындаңыз.


1. Пациенттен шығып тұрған эндоскоптың бөлігін түзулеңіз.

- Биопсия клапанын шығып тұрған құралдың бөлігін түзулеңіз.
- Ілмекті катушка қабынан шығару үшін сырғақты тірелгенше тартыңыз.

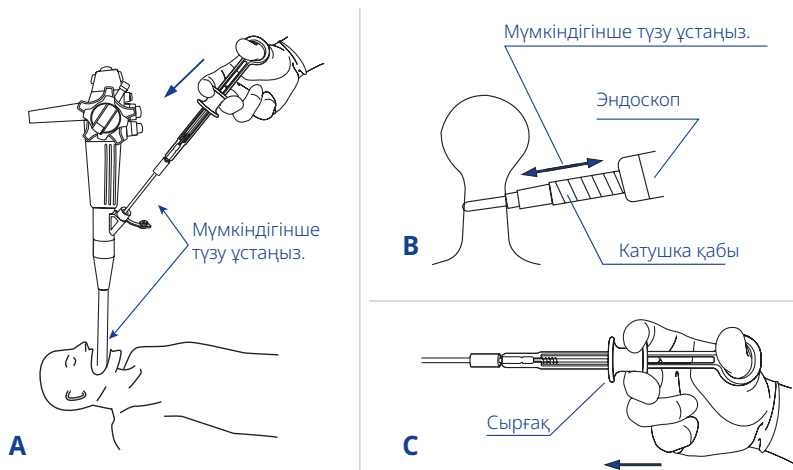


2. Түтік қабын, катушка қабын және операция сымын тістеуікпен немесе сым кескішпен кесіңіз.

- Эндоскопты шығарып алыңыз.

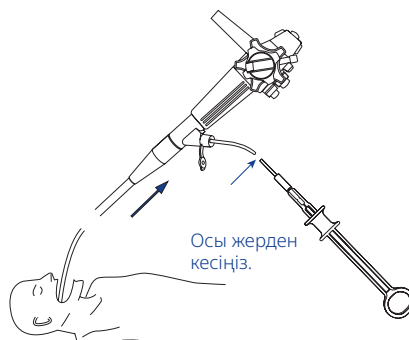

3. Катушка қабының алшақ ұшы ілмек шектегішіне жақын болмағанда.

- Эндоскопты түтік қабының бойымен қайта салыңыз.
- Ілмекті Olympus ілмек кескішімен кесіңіз.
- Түтік қабын, катушка қабын және операция жібін бірге шығарып алыңыз.

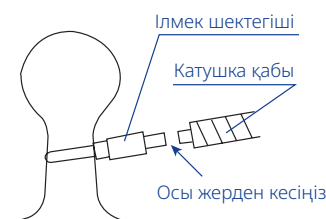

Катушка қабының алшақ ұшы ілмек шектегішіне жақын болғанда.

- Тіннің некрозы пайда болып, ілмек тінмен бірге өздігінен ажырағанға дейін ілмекті орнында қалдырыңыз. Бұл біраз уақыт алуы мүмкін.
- Ашық операцияны немесе басқа ықтимал терапияны орындаңыз.

Медицина ғылымы үздіксіз дамып жатқандықтан, өнім дизайнының, өнім сипаттамаларының, қосалқы жабдықтардың және қызмет ұсыныстарының техникалық жетілдірулері немесе өзгерістері қажет болуы мүмкін.