


„PolyLoop“ perrišimo įrenginys (HX-400U-30)

Trumpa naudojimo instrukcija

Perspėjimas: šiame vadove pateikiama tik „HX-400U-30 PolyLoop“ naudojimo vadovo santrauka. Būtinai vadovaukitės „Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30“ naudojimo vadovu, kuris buvo pridėtas prie įsigyto HX-400U-30.

Nomenklatūra

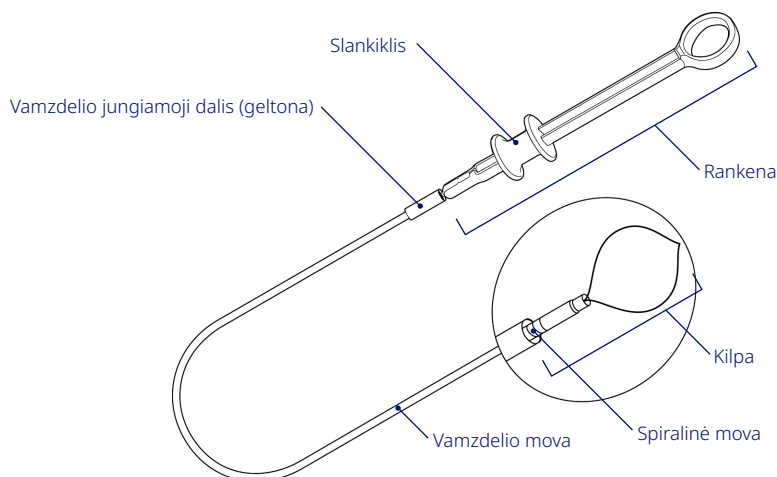


Paruošimas

1. Paspauskite vamzdelio jungiamąją dalį į distalinę pusę, kad kilpa būtų įtraukta į vamzdelio movą. Atsargiai įkiškite instrumentą į biopsijos vožtuvą.

Naudojimas



2. Traukite vamzdelio jungiamąją dalį, kol ji palies rankeną, kad kilpa išsitrauktų iš vamzdelio movos.

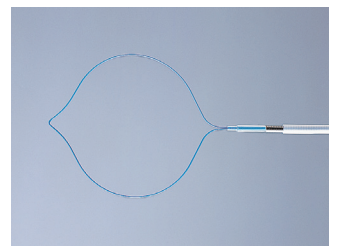

„PolyLoop“ perrišimo įrenginys (HX-400U-30)

Trumpa naudojimo instrukcija

Naudojimas (tęsinys)

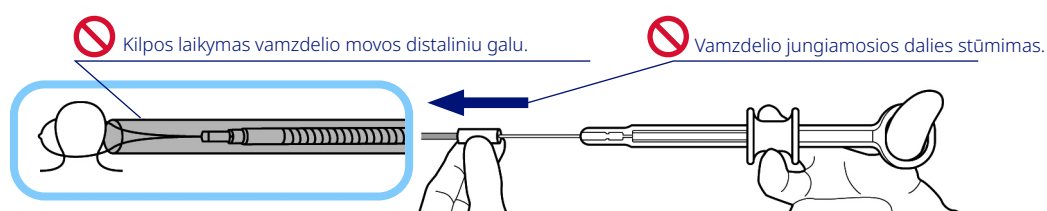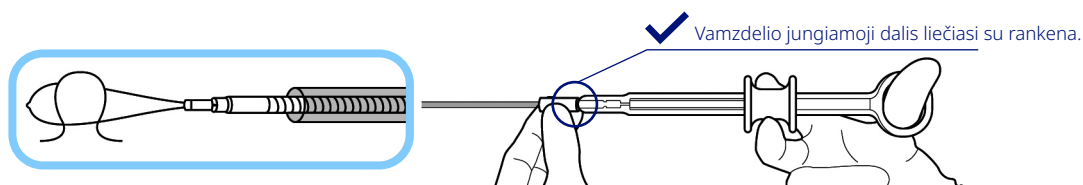

3. Apjuoskite audinį atvira kilpa. Patraukite slankiklį, kad perrištumėte gydomą audinį.

Perspėjimas: procedūros metu perrišdami audinius, kilpai nenaudokite per didelės jėgos.



4. Stumkite slankiklį, kol jis sustos, kad kabliukas būtų išstumtas iš spiralinės movos. Atjunkite kilpą nuo kabliuko.

Perspėjimas: nenuimkite kilpos nuo kabliuko, kol spiralinė mova nėra iškišta iš vamzdelio movos.





Perspėjimas: vamzdelio movos proksimalinį galą ir rankeną laikydami tiesiai endoskopo biopsijos vožtuvo atžvilgiu, stumkite slankiklį.



„PolyLoop“ perrišimo įrenginys (HX-400U-30)

Trumpa naudojimo instrukcija

Naudojimas (tęsinys)

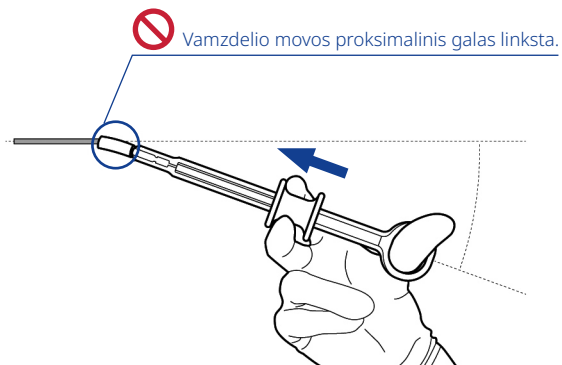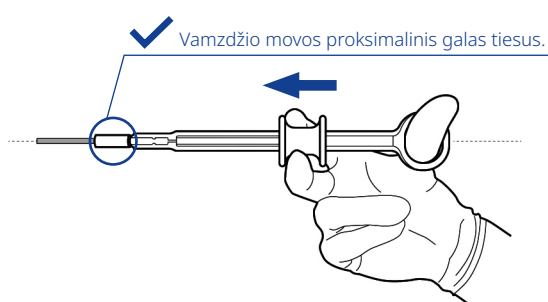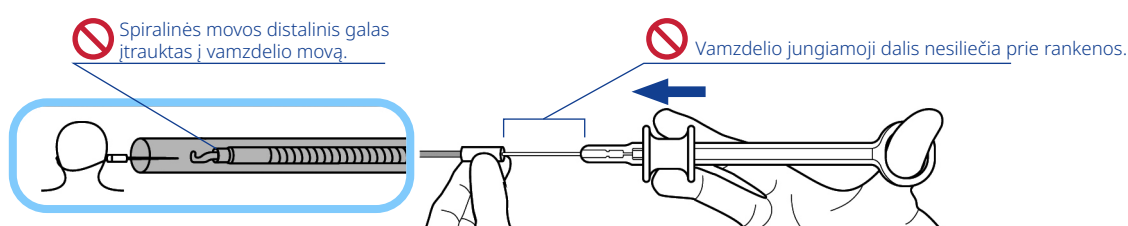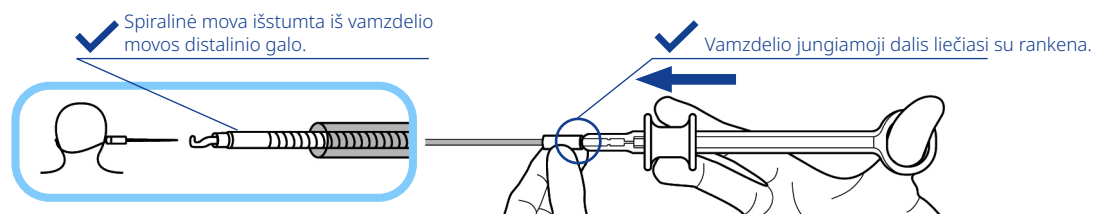

Pastaba: visada turėkite pasiruošę „Olympus“ kilpinį pjoviklį, žnyples ir (arba) vielos žirkles, kad galėtumėte nukirpti spiralinę movą, vamzdelio movą ir darbinę vielą, jeigu kilpos nepavyksta atjungti nuo instrumento.





„PolyLoop” perrišimo iřrenginys (HX-400U-30)

Trumpa naudojimo instrukcija


Skubus gydymas

Jei kilpos negalima atjungti nuo instrumento, atlikite šiaame skyriuje aprašytas procedūras.

1. Ištiesinkite tą endoskopo dalį, kuri yra išlindusi iš paciento.
 - Ištiesinkite tą instrumento dalį, kuri yra išlindusi iš biopsijos vožtuvo.
 - Stumkite slankiklį, kol jis sustos, kad kabliukas būtų išstumtas iš spiralinės movos.

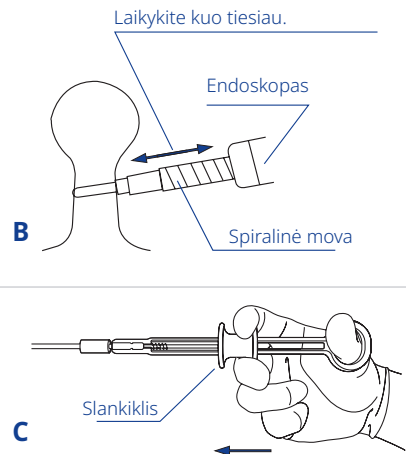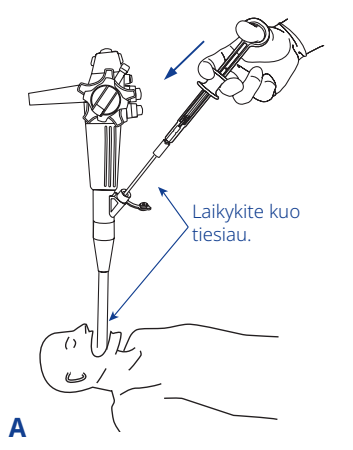


2. Nukirpkite vamzdelio movą, spiralinę movą ir darbinę vielą žnyplėmis arba vielos žirkklėmis.
 - Ištraukite endoskopą.

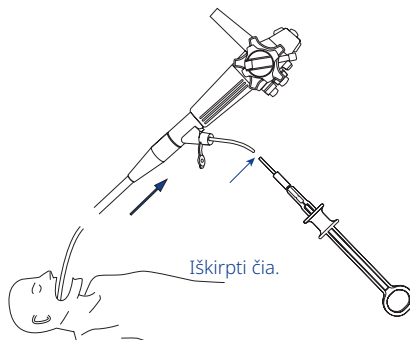

3. Jeigu spiralinės movos distalinis galas nėra šalia kilpos fiksatoriaus.

- Dar kartą įkiškite endoskopą palei vamzdelio movą.
- Kilpą nupjaukite „Olympus“ kilpiniu pjovikliu.
- Ištraukite vamzdelio movą, spiralinę movą ir darbinę vielą kartu.

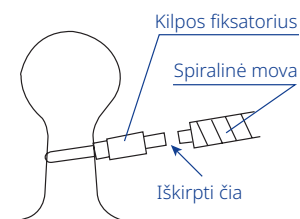

Jeigu spiralinės movos distalinis galas yra šalia kilpos fiksatoriaus.

- Palikite kilpą vietoje, kol įvyks audinio nekrozė ir kilpa bei audinys atsilaisvins. Tai gali užtrukti.
- Atlikite atvirą operaciją arba kitą galimą gydymą.

Ta kà zinàšanas par medicīnas jomu nemītīgi paplašinās, iespējams, būs nepieciešami tehniski pielāgojumi vai izmaiņas produkta dizainā, specifikācijās, piederumos un apkopē.