


PolyLoop ligācijas ierīce (HX-400U-30)

Ātro uzziņu rokasgrāmata

Uzmanību: Šajā rokasgrāmatā ir sniegts tikai HX-400U-30 PolyLoop lietošanas instrukciju kopsavilkums. Noteikti ievērojiet Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 lietošanas instrukciju, kas bija iekļauta HX-400U-30 pirkuma komplektācijā.

Apzīmējumi

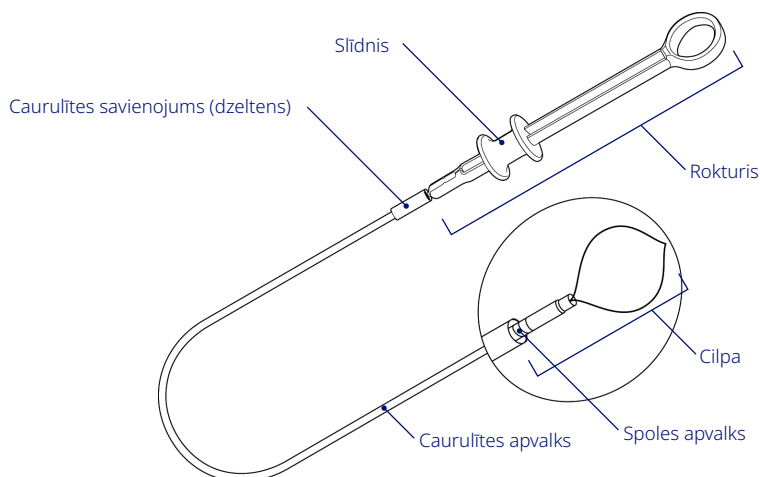


Sagatavošana

1. Nospiediet caurulītes savienojumu distāli, lai ievilktu cilpu caurulītes apvalkā. Uzmanīgi ievietojiet instrumentu biopsijas pieslēgvietas blīvē.

Operācija


2. Velciet caurulītes savienojumu, līdz tas pieskaras rokturim, lai izvilktu cilpu no caurulītes apvalka.

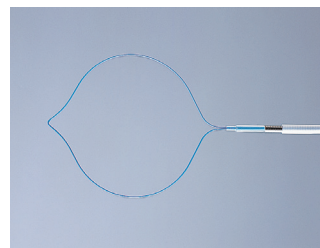

PolyLoop ligācijas ierīce (HX-400U-30)


Ātro uzziņu rokasgrāmata

Lietošana (turpinājums)

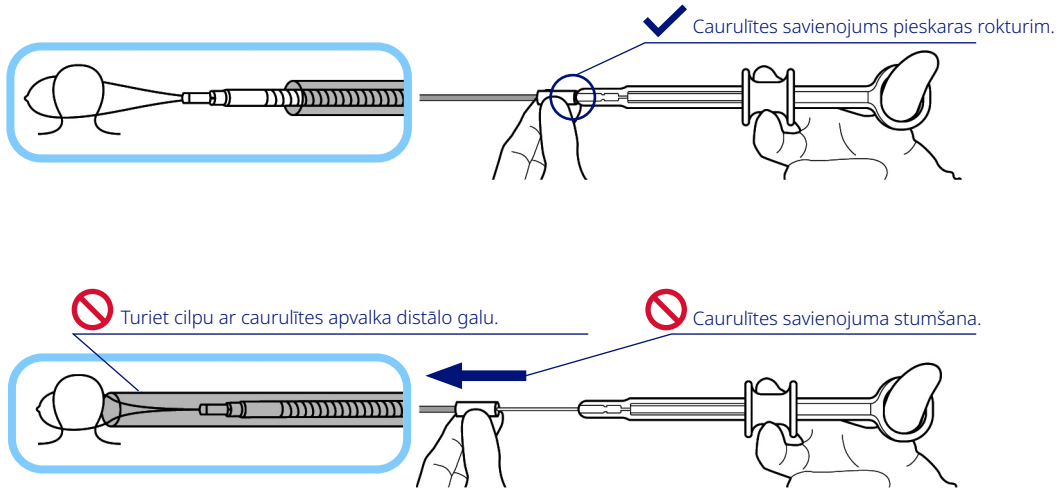

3. Aptveriet audus ar atvērto cilpu. Pavelciet slīdņi, lai sasaistītu mērķa audus.


Uzmanību: procedūras laikā, veicot audu ligāciju, cilpai nepiemērojiet pārmērīgu spēku.

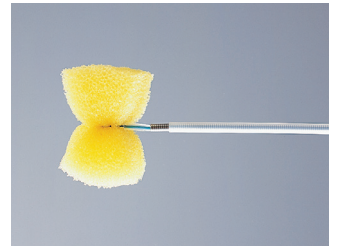

4. Nospiediet slīdņi, līdz tas apstājas, lai izvilktu āķi no spoles apvalka. Atvienojiet cilpu no āķa.

Uzmanību: nenoņemiet cilpu no āķa, kamēr spoles apvalks nav izvilkt no caurulītes apvalka.





Uzmanību: kad caurulītes apvalka proksimālais gals un rokturis atrodas tieši pret endoskopa biopsijas pieslēgvietas blīvi, nospiediet slīdņi.

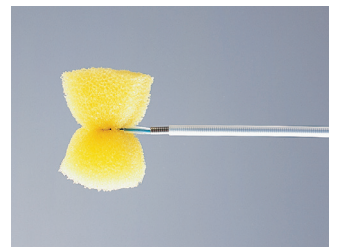

PolyLoop ligācijas ierīce (HX-400U-30)

Ātro uzziņu rokasgrāmata

Lietošana (turpinājums)

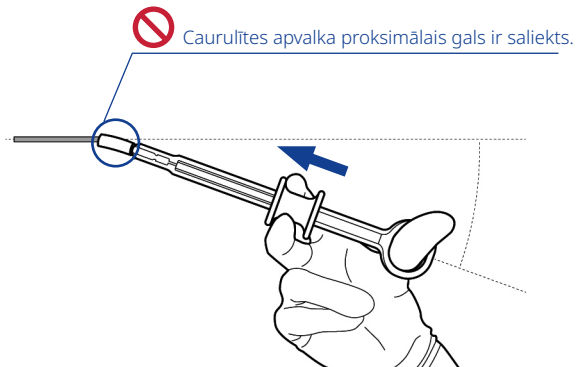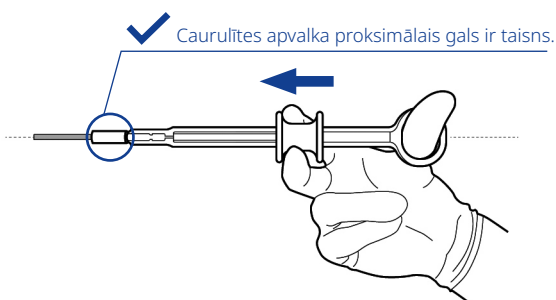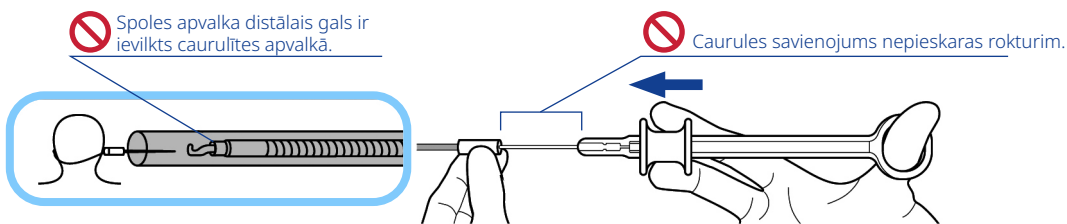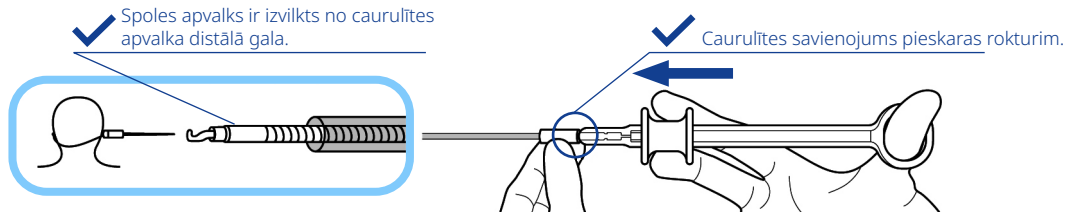

Piezīme: Vienmēr sagatavojiet Olympus cilpas griezēju, knaibles un/vai stiepļu grieznes, lai nogrieztu spoles apvalku, caurulītes apvalku un operāciju vadu gadījumā, ja cilpu nevar atvienot no instrumenta.



PolyLoop ligācijas ierīce (HX-400U-30)



Ātro uzzīņu rokasgrāmata

Ārkārtas ārstēšana

Ja cilpu nevar atvienot no instrumenta, veiciet šajā sadaļā aprakstītās procedūras.


1. Iztaisnojiet endoskopa daļu, kas sniedzas no pacienta.

- Iztaisnojiet instrumenta daļu, kas sniedzas no biopsijas pieslēgvieta blīves.
- Nospiediet slīdni, līdz tas apstājas, lai izvilktu āķi no spoles apvalka.

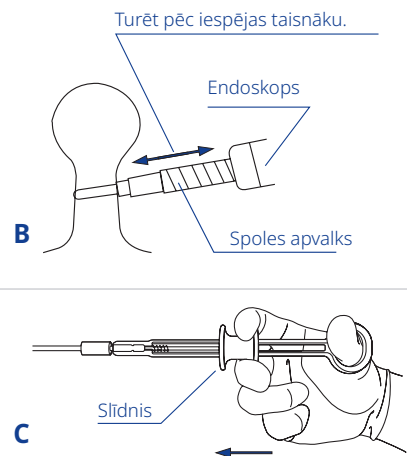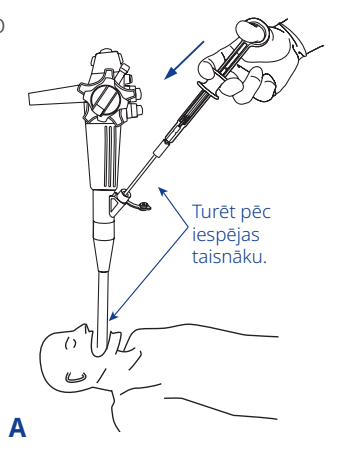


2. Ar knaiblēm vai stiepļu grieznēm nogrieziet caurulītes apvalku, spoles apvalku un operāciju vadu.

- Izvelciet endoskopu.

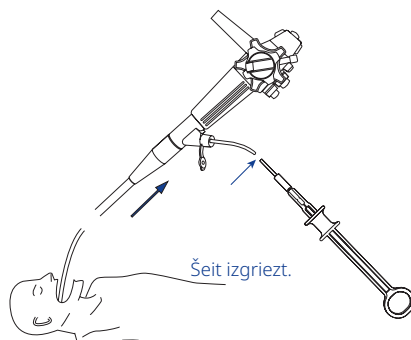

3. Ja spoles apvalka distālais gals nav tuvu cilpas aizturim.

- Vēlreiz ievietojiet endoskopu gar caurulītes apvalku.
- Nogrieziet cilpu, izmantojot Olympus cilpu griezēju.
- Noņemiet caurulītes apvalku, spoles apvalku un operāciju vadu visus kopā.

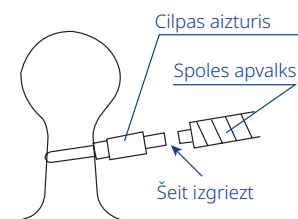

Kad spoles apvalka distālais gals ir tuvu cilpas aizturim.

- Atstājiet cilpu vietā, līdz notiek audu nekroze un cilpa un audi atbrīvojas. Tas var prasīt zināmu laiku.
- Veiciet atklātu operāciju vai citu iespējamo ārstēšanu.

Tā kā zināšanas par medicīnas jomu nemitīgi paplašinās, iespējams, būs nepieciešami tehniski pielāgojumi vai izmaiņas produkta dizainā, specifikācijās, piederumos un apkopē.