


PolyLoop afbindhulpmiddel (HX-400U-30)

Beknopte referentiegid

Let op: Deze handleiding is slechts een samenvatting van de gebruiksaanwijzing voor de HX-400U-30 PolyLoop. Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing voor de Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 volgt die bij de HX-400U-30 is geleverd.

Terminologie

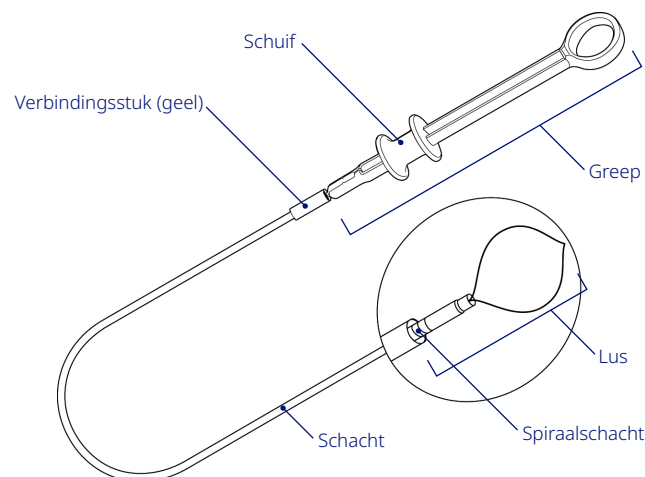


Vorbereiding

1. Duw het verbindingsstuk in distale richting om de lus in de schacht terug te trekken. Plaats het instrument voorzichtig in het biopsieventiel.

Bediening


2. Trek aan het verbindingsstuk totdat het de greep raakt om de lus uit de schacht te trekken.

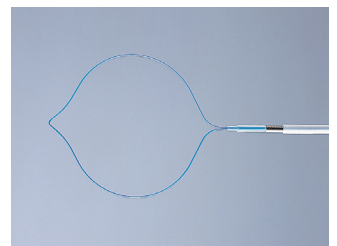

PolyLoop afbindhulpmiddel (HX-400U-30)


Beknpte referentiegid

Bediening (vervolg)

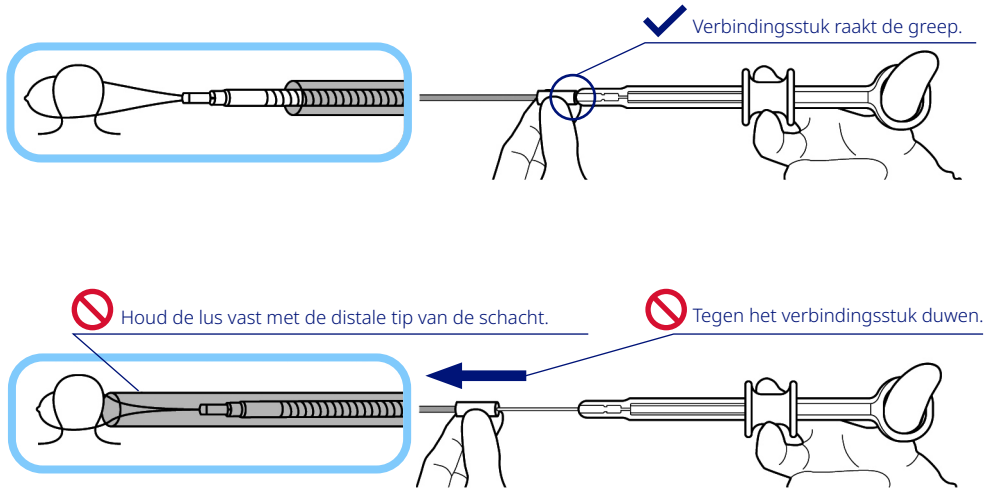

3. Plaats de open lus om het weefsel. Trek aan de schuif om het doelweefsel af te binden.


Let op: Oefen tijdens de procedure van het afbinden van weefsel geen onnodige kracht op de lus uit.

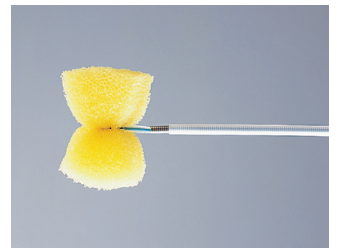

4. Duw tegen de schuif totdat deze stopt, om de haak uit de spiraalschacht te trekken. Maak de lus los van de haak.

Let op: Verwijder de lus alleen van de haak als de spiraalschacht uit de schacht is getrokken.




Let op: Houd het proximale uiteinde van de schacht en de greep recht tegen het biopsieventiel van de endoscoop en duw tegen de schuif.

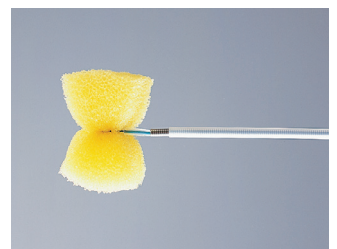

PolyLoop afbindhulpmiddel (HX-400U-30)

Beknopte referentieids

Bediening (vervolg)

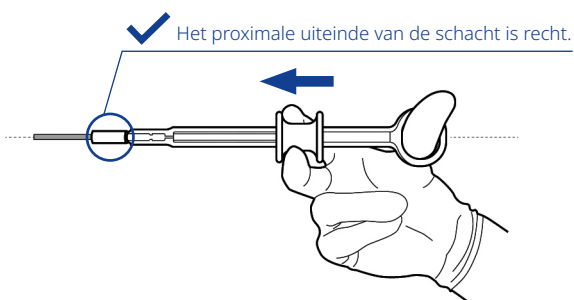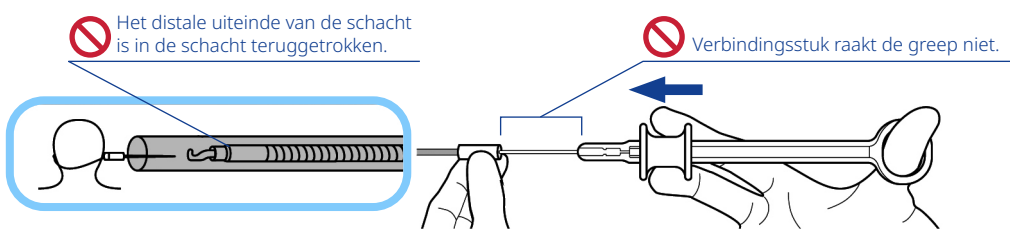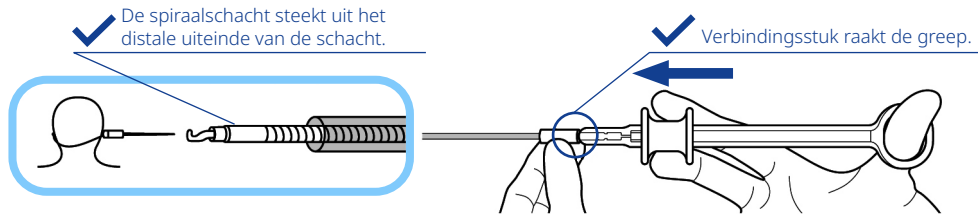

Opmerking: Houd altijd de lussnijder, tang en/of draadtang van Olympus bij de hand om de spiraalschacht, de schacht en de bedieningsdraad door te knippen als de lus niet van het instrument kan worden losgemaakt.




PolyLoop afbindhulpmiddel (HX-400U-30)

Beknopte referentieguides


Noodbehandeling

Als de lus niet van het instrument kan worden losgemaakt, volgt u de procedures die in dit hoofdstuk worden beschreven.

1. Maak het deel van de endoscoop dat uit de patiënt steekt recht.
 - Maak het deel van het instrument dat uit het biopsieventiel steekt recht.
 - Duw tegen de schuif totdat deze stopt, om de haak uit de spiraalschacht te trekken.

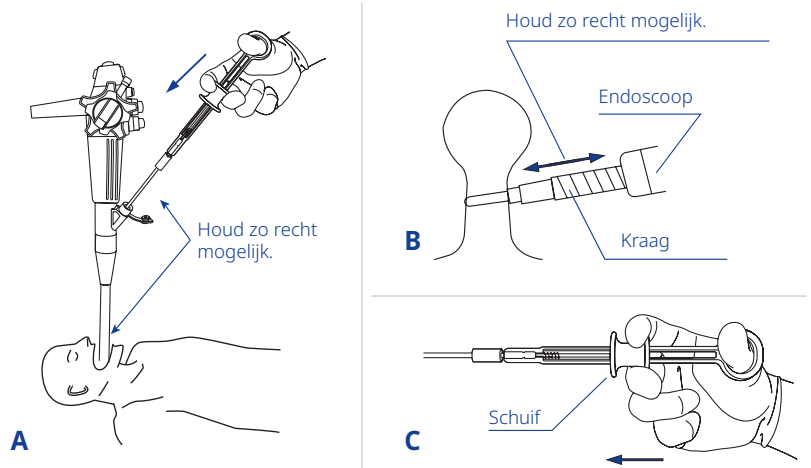


2. Knip de schacht, de spiraalschacht en de bedieningsdraad door met een tang of draadtang.
 - Trek de endoscoop terug.

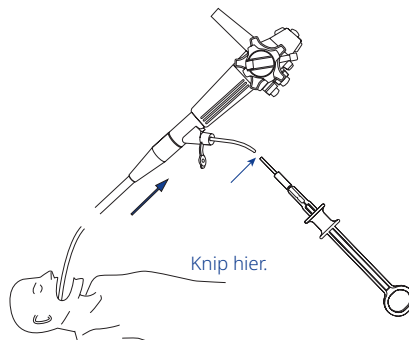

3. Als het distale uiteinde van de spiraalschacht niet dicht bij de lusstop zit.

- Breng de endoscoop opnieuw in langs de spiraalschacht.
- Knip de lus door met de Olympus kniptang.
- Trek de schacht, de spiraalschacht en de bedieningsdraad samen terug.

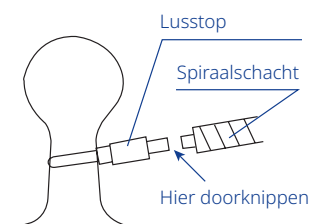

Wanneer het distale uiteinde van de spiraalschacht zich dicht bij de lusstop bevindt.

- Laat de lus zitten totdat weefselnecrose optreedt en de lus en het weefsel loskomen. Dit kan enige tijd duren.
- Voer open chirurgie of een andere mogelijke behandeling uit.

Aangezien de medische kennis blijft toenemen, kunnen technische aanpassingen of veranderingen van het productontwerp, de productspecificaties, accessoires en het serviceaanbod nodig zijn.