


Urządzenie do podwiązywania PolyLoop (HX-400U-30)

Skrócony przewodnik

Uwaga: Niniejszy przewodnik stanowi jedynie podsumowanie instrukcji stosowania urządzenia HX-400U-30 PolyLoop. Należy postępować zgodnie z instrukcjami urządzenia Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 dołączonymi do zakupionego urządzenia HX-400U-30.

Nazewnictwo

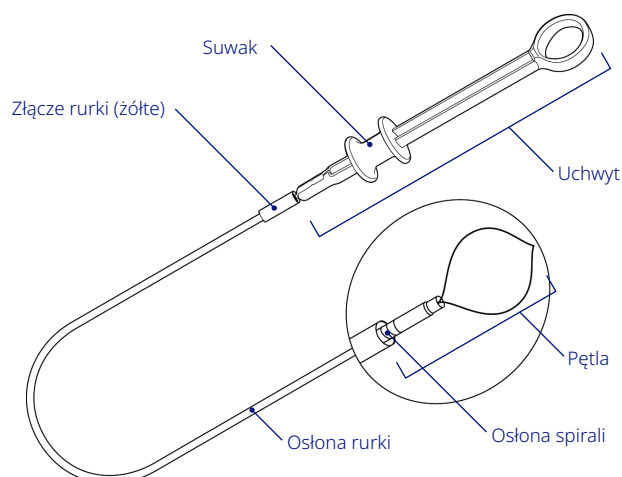


Przygotowania

1. Popchnij złącze rurki w kierunku dystalnym, aby wsunąć pętlę do osłony rurki. Ostrożnie wprowadź przyrząd do zaworu biopsyjnego.

Obsługa


2. Pociągnij złącze rurki, aż dotknie uchwytu, aby wysunąć pętlę z osłony rurki.

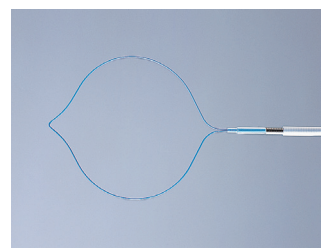

Urządzenie do podwiązywania PolyLoop (HX-400U-30)


Skrócony przewodnik

Obsługa (ciąg dalszy)

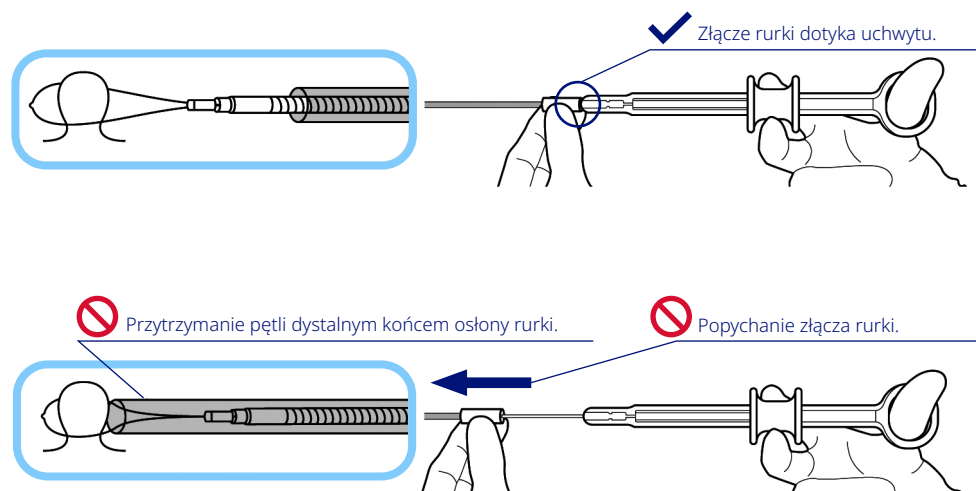

3. Otocz tkankę otwartą pętlą. Pociągnij suwak, aby podwiązać tkankę docelową.

Przestroga: Nie przykładaj niepotrzebnej siły do pętli podczas podwiązywania tkanki w trakcie zabiegu.

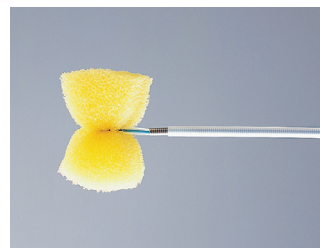

4. Wciśnij suwak do oporu, aby wysunąć haczyk z osłony spirali. Odłącz pętlę od haczyka.

Przestroga: Nie zdejmuj pętli z haczyka, gdy osłona spirali nie jest wysunięta z osłony rurki.




Przestroga: gdy proksymalna końcówka osłony rurki i uchwyt są utrzymywane na wprost przy zaworze biopsyjnym endoskopu, popchnij suwak.



Urządzenie do podwiązywania PolyLoop (HX-400U-30)

Skrócony przewodnik

Obsługa (ciąg dalszy)

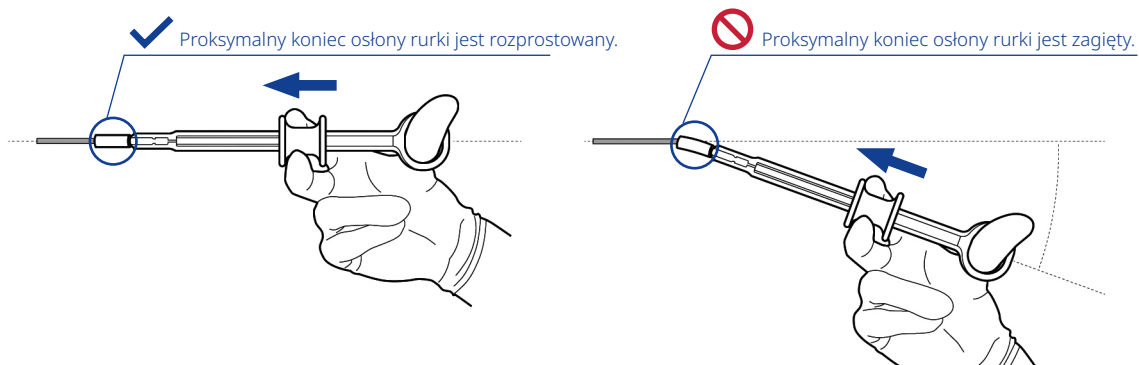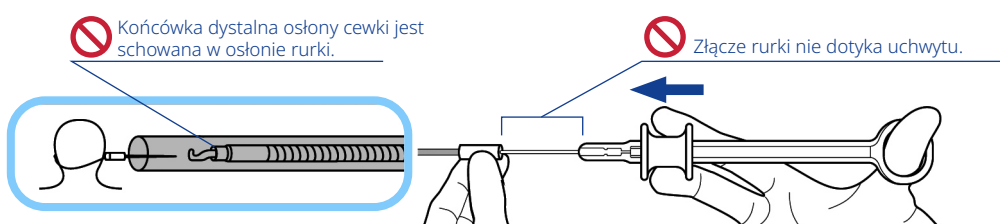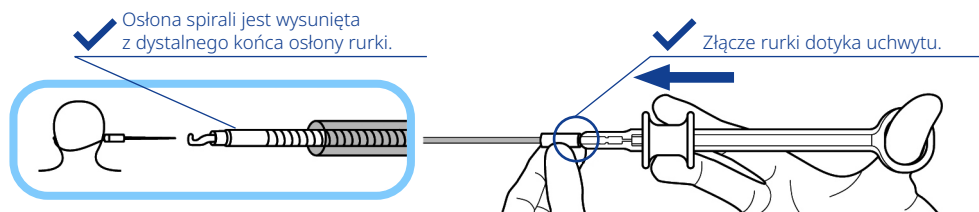

Uwaga: na wypadek braku możliwości odłączenia pętli od przyrządu należy zawsze przygotować wyrób Loop Cutter, szczypce i/lub przecinak do drutu Olympus, aby przeciąć osłonę spirali, osłonę rurki i przewód roboczy.



Urządzenie do podwiązywania PolyLoop (HX-400U-30)


Skrócony przewodnik

Leczenie w nagłych wypadkach

Jeśli pętli nie można odłączyć od przyrządu, należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w tej sekcji.


1. Wyprostuj część endoskopu, która wystaje z ciała pacjenta.

- Wyprostuj część przyrządu wystającą z zaworu biopsyjnego.
- Wciśnij suwak do oporu, aby wysunąć haczyk z osłony spirali.

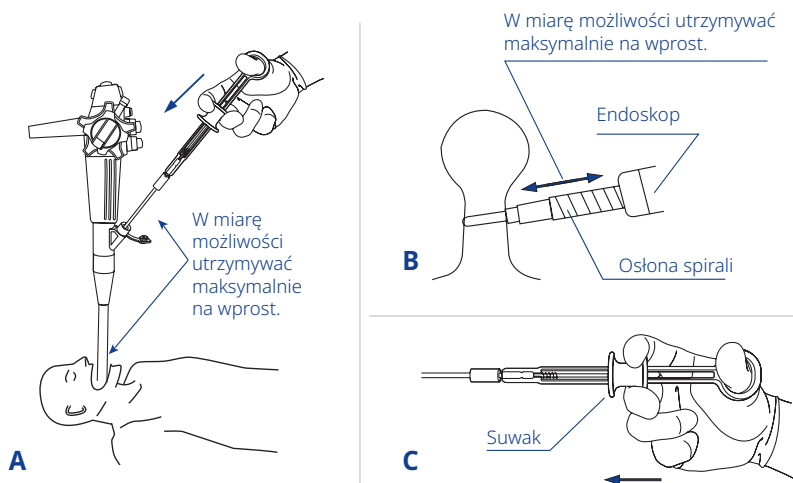


2. Przetnij osłonę rurki, osłonę spirali i przewód roboczy za pomocą szczypiec lub obcinaków do drutu.

- Wyciągnij endoskop.

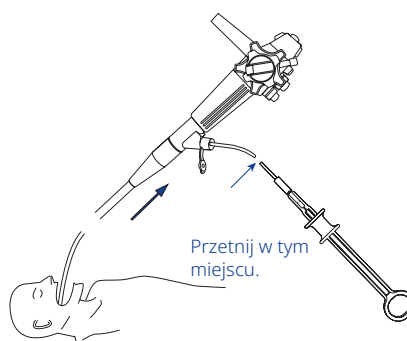

3. Gdy końcówka dystalna osłony spirali nie znajduje się blisko ogranicznika pętli.

- Ponownie wprowadź endoskop wzdłuż osłony rurki.
- Odetnij pętlę za pomocą przyrządu Olympus Loop Cutter.
- Wyciągnąć razem osłonę rurki, osłonę spirali i przewód roboczy.

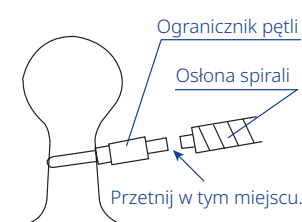

Gdy końcówka dystalna osłony spirali znajduje się blisko ogranicznika pętli.

- Pozostaw pętlę na miejscu do momentu martwicy tkanki i uwolnienia pętli i tkanki. Może to zająć trochę czasu.
- Przeprowadź operację otwartą lub inne możliwe leczenie.

W związku z ciągłym rozwojem wiedzy medycznej mogą być konieczne modyfikacje techniczne lub zmiany w projekcie lub specyfikacji produktów i akcesoriów oraz w ofercie usług.