


PolyLoop medicinsko sredstvo za ligiranje (HX-400U-30)

Brzi referentni vodič

Pažnja: Ovaj vodič predstavlja samo rezime uputstva za upotrebu proizvoda HX-400U-30 PolyLoop. Obavezno pratite uputstvo za upotrebu proizvoda EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 kompanije Olympus koje je uključeno u kupovinu proizvoda HX-400U-30.

Nomenklatura

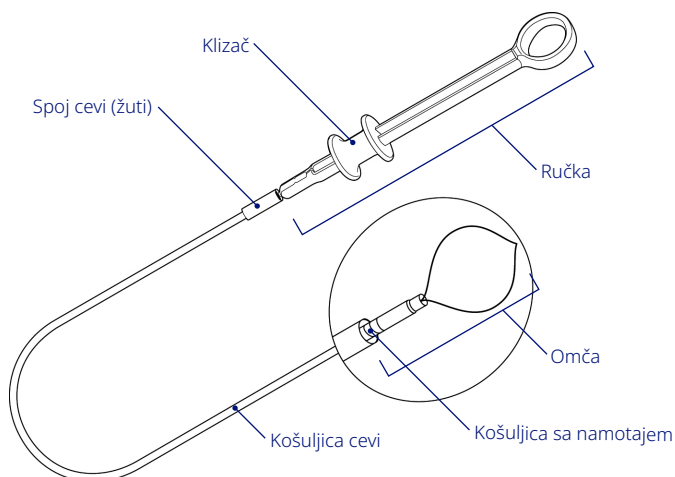


Priprema

1. Gurnite spoj cevi distalno da biste uvukli omču u košuljicu cevi. Pažljivo umetnite instrument u biopsioni ventil.

Rukovanje


2. Povlačite spoj cevi dok ne dodirne ručku da biste izvukli omču iz košuljice cevi.

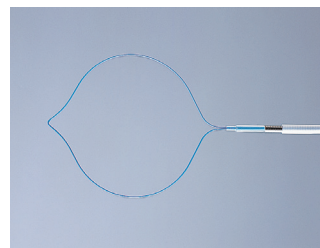

PolyLoop medicinsko sredstvo za ligiranje (HX-400U-30)



Brzi referentni vodič

Rukovanje (nastavak)

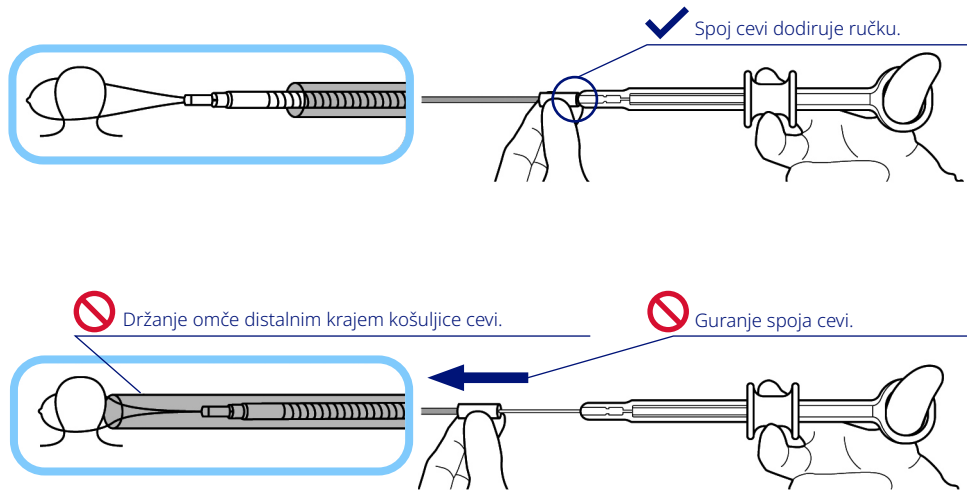

3. Okružite tkivo otvorenom omčom. Povucite klizač da biste ligirali ciljno tkivo.


Oprez: Nemojte primenjivati nepotrebnu silu na omču prilikom ligiranja tkiva tokom procedure.

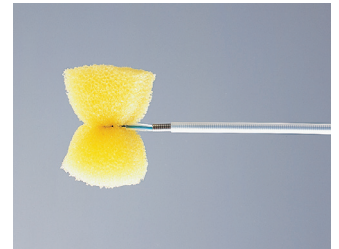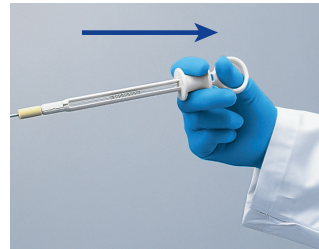

4. Gurajte klizač dok se ne zaustavi da biste izvukli kuku iz košuljice sa namotajem. Odvojite omču od kuke.

Oprez: Nemojte uklanjati omču sa kuke dok košuljica sa namotajem ne bude izvučena iz košuljice cevi.





Oprez: Držite proksimalni kraj košuljice cevi i ručku ravno uz biopsioni ventil endoskopa i gurnite klizač.

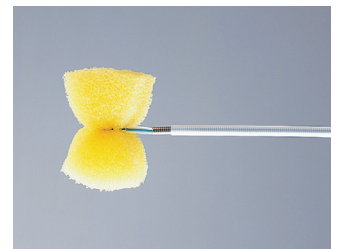

PolyLoop medicinsko sredstvo za ligiranje (HX-400U-30)

Brzi referentni vodič

Rukovanje (nastavak)

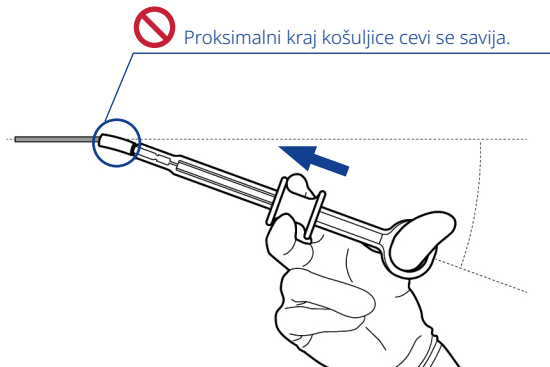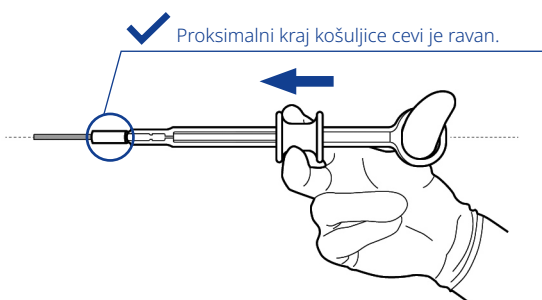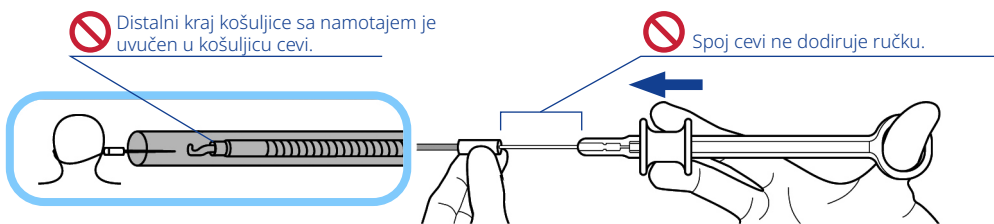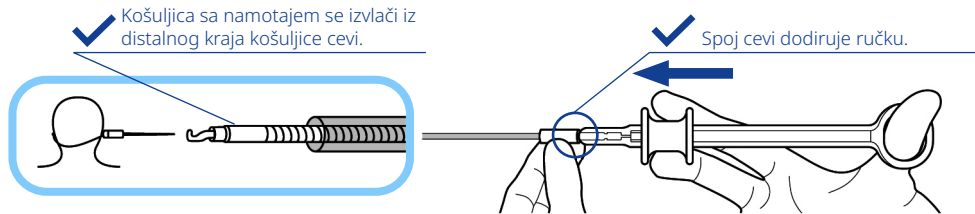

Napomena: Uvek držite pri ruci Olympus sekač omče, klešta i/ili sekače žice kako biste isekli košuljicu sa namotajem, košuljicu cevi i radnu žicu ako se omča ne može odvojiti od instrumenta.



PolyLoop medicinsko sredstvo za ligiranje (HX-400U-30)


Brzi referentni vodič

Tretman u hitnom slučaju

Ako omča ne može da se odvoji od instrumenta, pratite procedure opisane u ovom odeljku.


1. Ispravite deo endoskopa koji se proteže od pacijenta.

- Ispravite deo instrumenta koji se proteže od biopsionog ventila.
- Gurajte klizač dok se ne zaustavi da biste izvukli kuku iz košuljice sa namotajem.

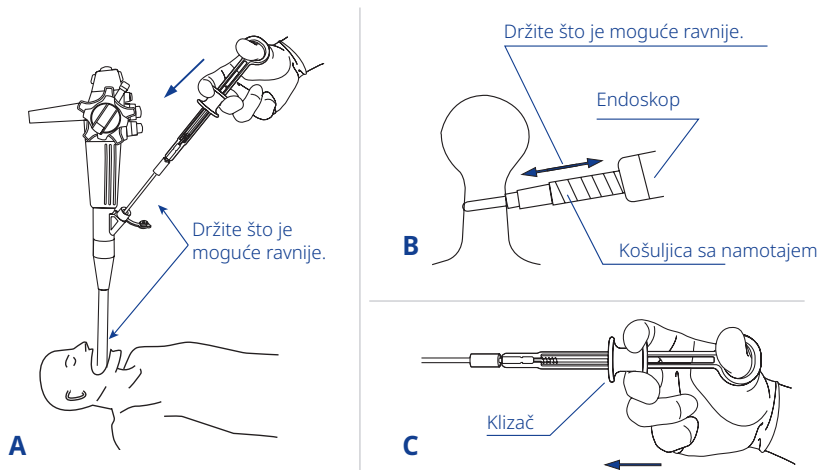


2. Isecite košuljicu cevi, košuljicu sa namotajem i radnu žicu pomoću klešta ili sekača žice.

- Izvucite endoskop.

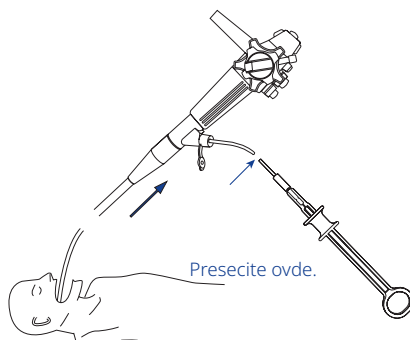

3. Kada distalni kraj košuljice sa namotajem nije blizu zaustavljača omče.

- Ponovo umetnite endoskop duž košuljice cevi.
- Isecite petlju pomoću Olympus sekača omče.
- Izvucite košuljicu cevi, košuljicu sa namotajem i radnu žicu zajedno.

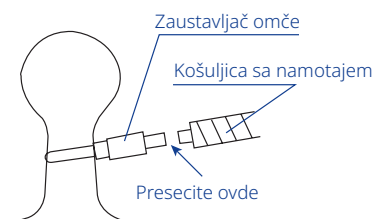

Kada je distalni kraj košuljice sa namotajem blizu zaustavljača omče.

- Ostavite omču na mestu dok ne dođe do nekroze tkiva i dok se omča i tkivo ne oslobode. Ovo može potrajati neko vreme.
- Izvršite otvorenu operaciju ili drugi mogući tretman.

Kako se medicinsko znanje neprestano širi, mogu biti potrebne tehničke modifikacije ili promene dizajna proizvoda, specifikacija proizvoda, dodatka i ponude usluga.