


PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)

Snabbguide

Iaktta försiktighet: Den här handboken är endast en sammanfattning av bruksanvisningen för HX-400U-30 PolyLoop. Se till att följa bruksanvisningen för Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 som medföljde ditt köp av HX-400U-30.

Nomenklatur

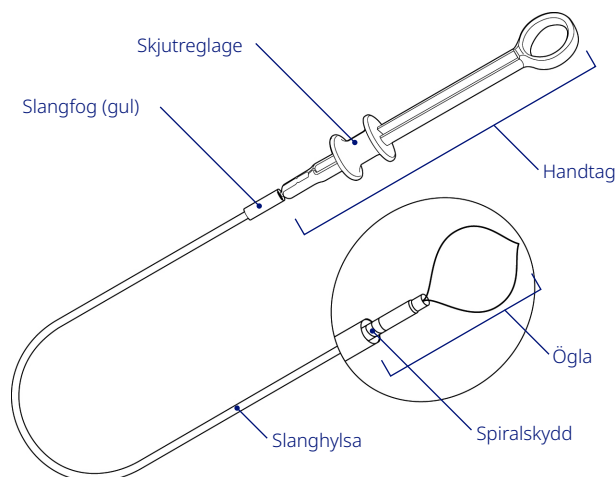


Förberedelser

1. Tryck slangfogen distalt för att dra tillbaka ögla i slanghylsa. För försiktigt in instrumentet i biopsiventilen.

Användning


2. Dra i slangfogen tills den nuddar handtaget för att förlänga ögla från slanghylsa.

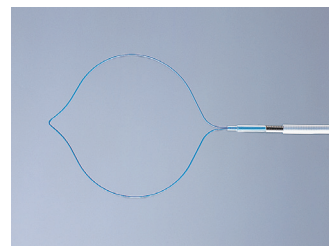

PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)


Snabbguide

Användning (fortsättning)

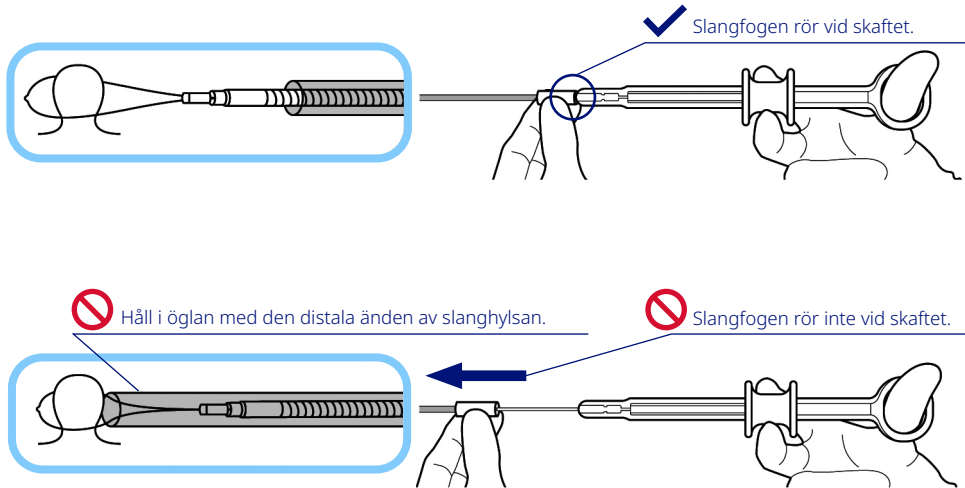

3. Omge vävnaden med den öppna öglan. Dra i skjutreglaget för att ligera vävnaden i målområdet.


Iaktta försiktighet: Använd inte onödig kraft på öglan när du ligerar vävnad under proceduren.

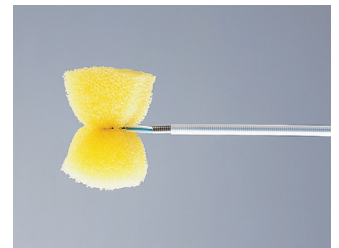

4. Tryck på skjutreglaget tills det tar stopp för att dra ut kroken från spiralskyddet. Lossa öglan från kroken.

Iaktta försiktighet: Ta inte bort öglan från kroken när spiralskyddet inte skjuter ut från slanghylsan.





Iaktta försiktighet: Tryck på skjutreglaget med den proximala änden av slanghylsan och handtaget rakt mot endoskopets biopsiventil.

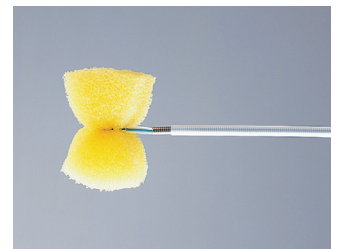

PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)

Snabbguide

Användning (fortsättning)

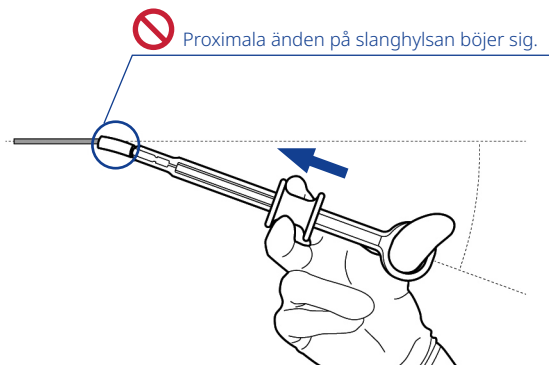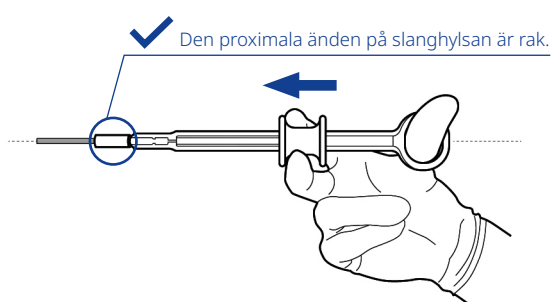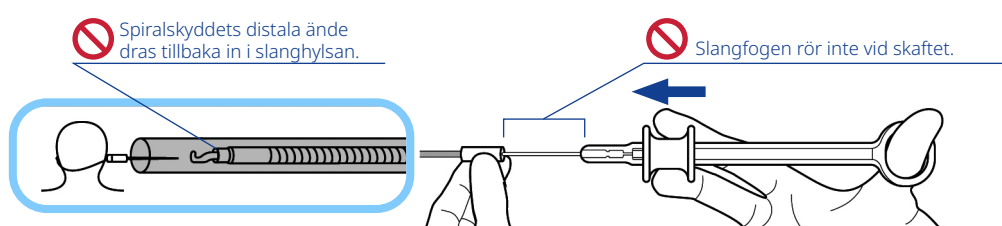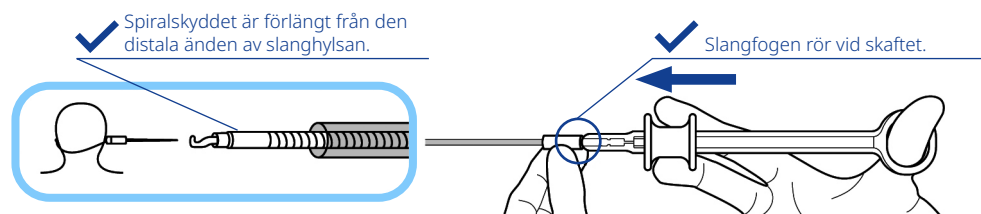

Obs: Ha alltid Olympus slyngskärare, tång och/eller avbitartång redo att klippa av spiralskyddet, slanghylsan och manöverwire om ögla inte kan tas loss från instrumentet.



PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)



Snabbguide

Akut behandling

Om ögla inte kan tas loss från instrumentet, följ de procedurer som beskrivs i detta avsnitt.


1. Räta ut den del av endoskopet som sträcker sig ut från patienten.

- Räta ut den del av instrumentet som sträcker sig från biopsiventilen.
- Tryck på skjutreglaget tills det tar stopp för att dra ut kroken från spiralskyddet.

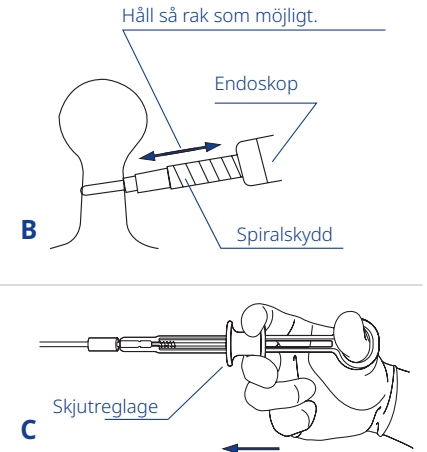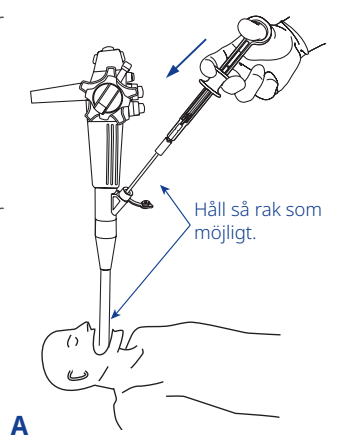


2. Skär av slanghylsan, spiralskyddet och manöverwire med hjälp av en tång eller avbitartång.

- Dra ut endoskopet.

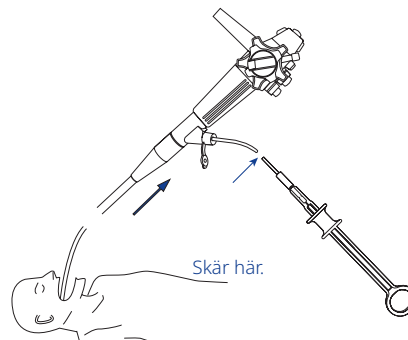

3. När den distala änden på spiralskyddet inte är nära öglestoppet.

- För in endoskopet igen längs slanghylsan.
- Skär av ögla med Olympus slyngskärare.
- Dra ut slanghylsan, spiralskyddet och manöverwire tillsammans.

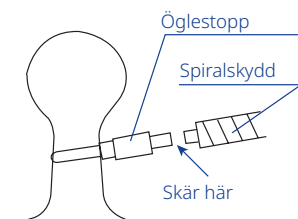

När den distala änden av spiralskyddet är nära öglestoppet.

- Låt ögla sitta kvar tills vävnadsnekros uppstår så lossnar ögla och vävnaden. Detta kan ta lite tid.
- Utför öppen kirurgi eller annan möjlig behandling.

Eftersom kunskapen om medicin ständigt växer kan tekniska modifieringar eller ändringar av produktdesign, produktspecifikationer, tillbehör och tjänsteerbjudanden krävas.