


Ligačné zariadenie PolyLoop (HX-400U-30)

Stručná príručka

Upozornenie: Táto príručka je len súhrnom návodu na obsluhu zariadenia HX-400U-30 PolyLoop. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na používanie zariadenia Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30, ktorý bol priložený k zariadeniu HX-400U-30.

Názvoslovie

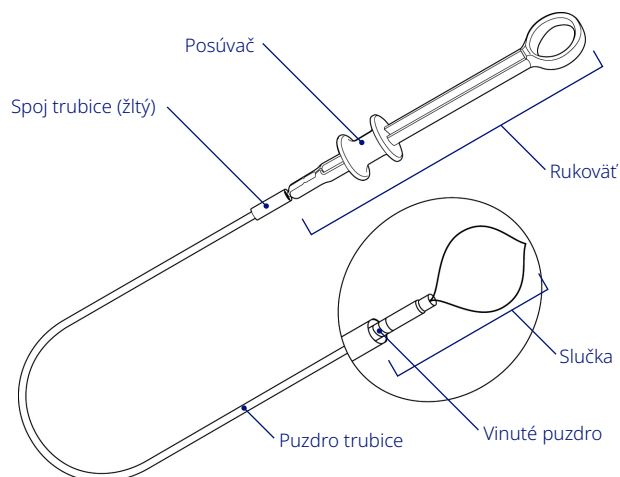


Príprava

1. Potlačte spoj trubice distálne, aby sa slučka zasunula do puzdra trubice. Opatrne zasuňte nástroj do bioptického ventilu.

Používanie


2. Potiahnite spoj trubice, kým sa nedotkne rukoväti, aby sa predĺžila slučka z puzdra trubice.

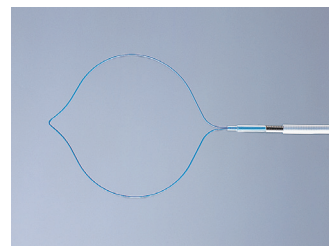

Ligačné zariadenie PolyLoop (HX-400U-30)



Stručná príručka

Používanie (pokračovanie)

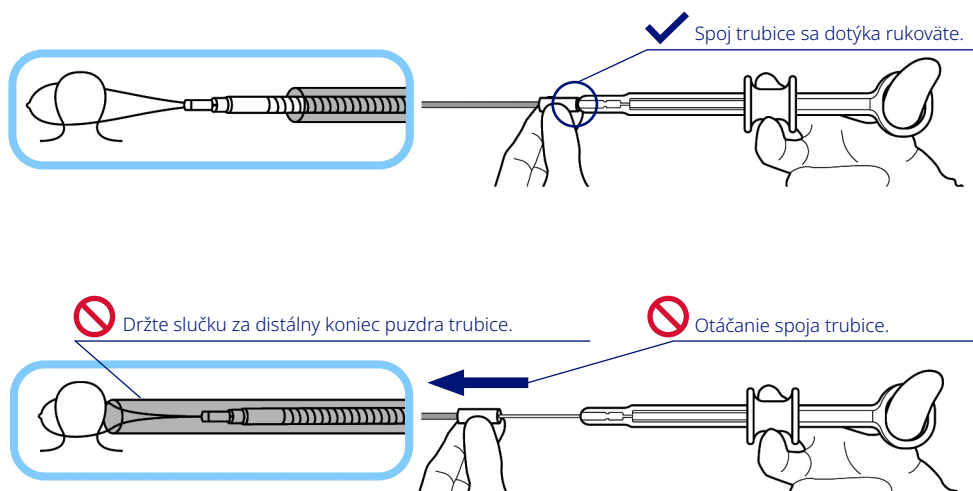

3. Obkoleste tkanivo otvorenou slučkou. Potiahnite posúvačom, aby ste podviazali cieľové tkanivo.


Upozornenie: Pri ligácii tkaniva počas zákroku nevyvíjajte na slučku zbytočnú silu.

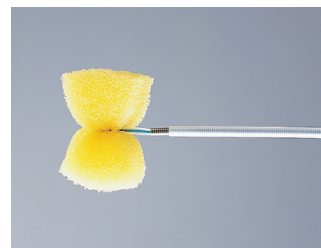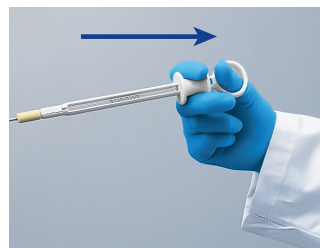

4. Posuňte posúvač až na doraz, aby sa háčik vysunul z puzdra cievky. Odpojte slučku od háčika.

Upozornenie: Neodstraňujte slučku z háčika, pokiaľ nie je puzdro cievky vysunuté z puzdra trubice.





Upozornenie: S proximálnym koncom puzdra trubice a rukoväťou držanou rovno oproti bioptickému ventilu endoskopu zatlačte posúvač.

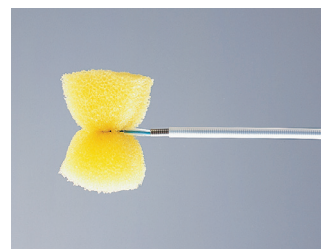

Ligačné zariadenie PolyLoop (HX-400U-30)

Stručná príručka

Používanie (pokračovanie)

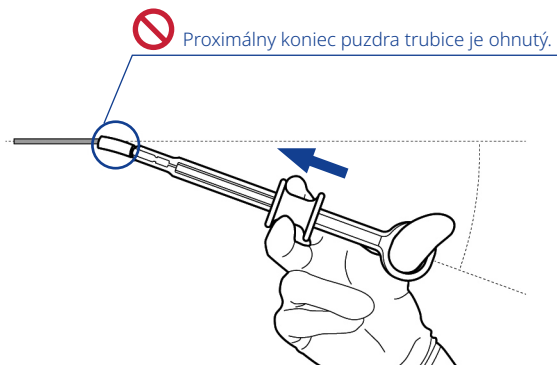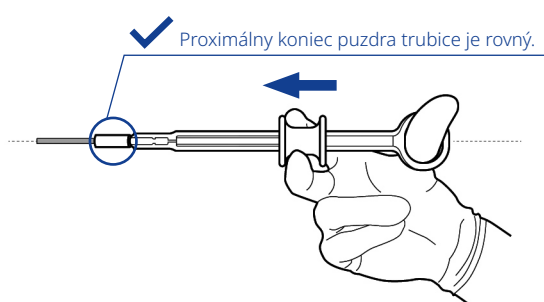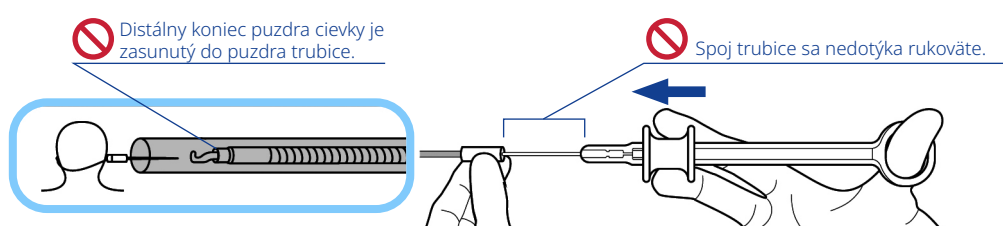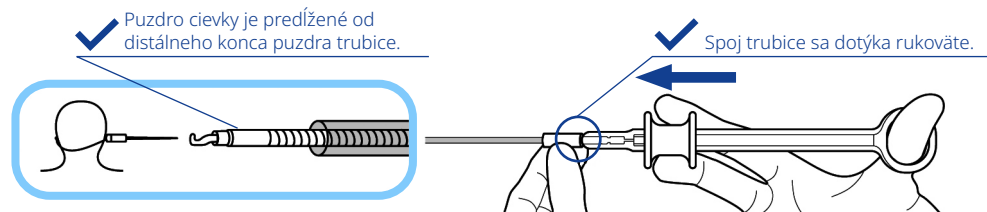

Poznámka: Vždy majte pripravené nožnice na slučku, kliešte a/alebo štikacie kliešte Olympus na odrezanie puzdra cievky, puzdra trubice a ovládacieho drôtu v prípade, keď sa slučka nedá oddeliť od nástroja.



Ligačné zariadenie PolyLoop (HX-400U-30)



Stručná príručka

Postup v núdzovej situácii

Ak sa slučka nedá odpojiť od nástroja, postupujte podľa pokynov v tejto časti.


1. Vyrovnajte časť endoskopu, ktorá vyčnieva z pacienta.

- Vyrovnajte časť nástroja, ktorá vyčnieva z bioptického ventilu.
- Posuňte posúvač až na doraz, aby sa háčik vysunul z puzdra cievky.

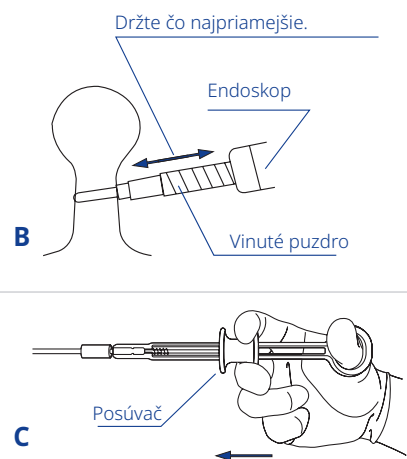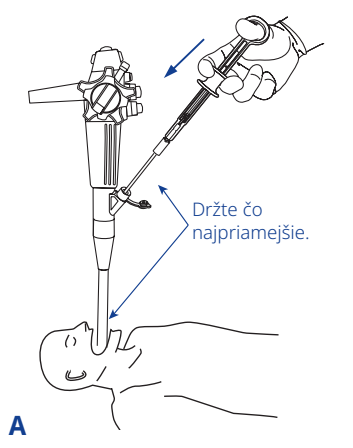


2. Odrežte puzdro trubice, puzdro cievky a ovládací drôt pomocou klieští alebo štikacích klieští.

- Vytiahnite endoskop.

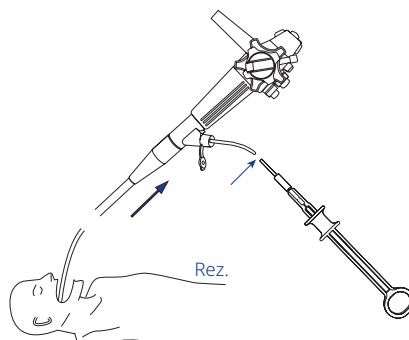

3. Keď distálny koniec puzdra cievky nie je blízko zarážky slučky.

- Znovu vložte endoskop pozdĺž puzdra trubice.
- Odrežte slučku pomocou nožníc na slučky Olympus.
- Vyberte puzdro trubice, puzdro cievky a operačný drôt naraz.

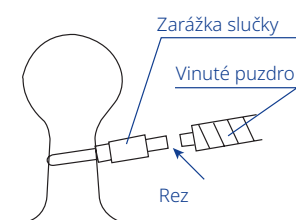

Keď distálny koniec puzdra cievky je blízko zarážky slučky.

- Slučku ponechajte na mieste, kým nedôjde k nekróze tkaniva a slučka a tkanivo sa neuvoľní. Môže to trvať určitý čas.
- Vykonajte otvorený chirurgický zákrok alebo iný možný liečebný postup.

Pretože lekárske vedomosti neustále pribúdajú, môžu byť potrebné technické úpravy alebo zmeny v dizajne produktu, jeho špecifikáciách, príslušenstve a ponuke služieb.