


Pripomoček za lepljenje PolyLoop (HX-400U-30)

Kratek referenčni priročnik

Pozor: ta priročnik je le povzetek navodil za uporabo pripomočka HX-400U-30 PolyLoop. Upoštevajte navodila za uporabo pripomočka Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30, ki so bila priložena ob nakupu pripomočka HX-400U-30.

Nomenklatura

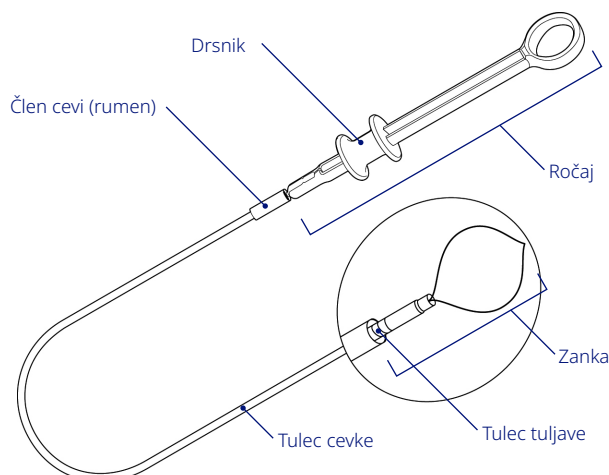


Priprava

1. Člen cevi potisnite distalno, da se zanka umakne v tulec cevke. Instrument previdno vstavite v biopsijski ventil.

Operacija


2. Vlecite spoj cevke, dokler se ne dotakne ročaja, da se zanka izvleče iz tulca cevi.

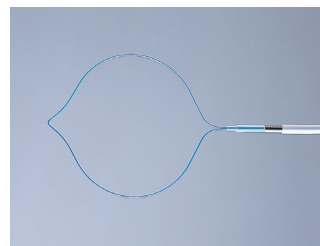

Pripomoček za lepljenje PolyLoop (HX-400U-30)


Kratek referenčni priročnik

Operacija (nadaljevanje)

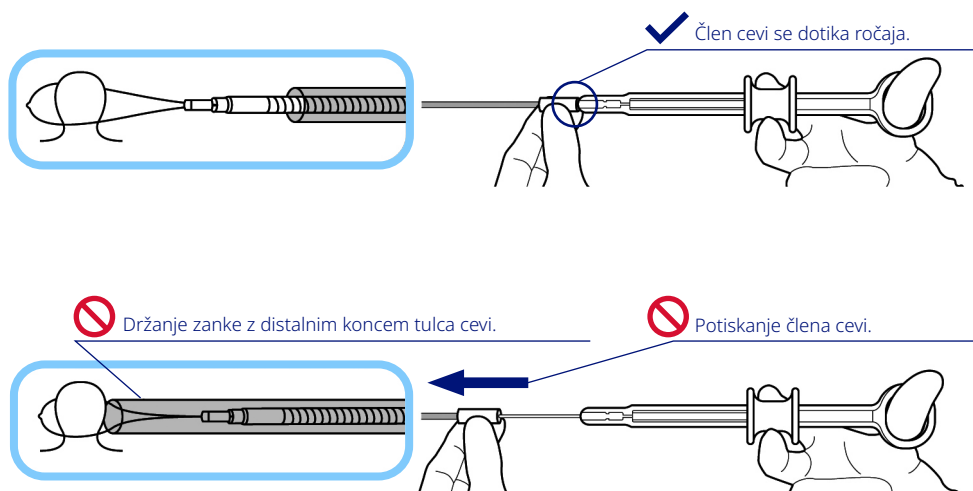

3. Obkrožite tkivo z odprto zanko. Povlecite drsnik, da zalepite ciljno tkivo.


Pozor: med postopkom ne uporabljajte nepotrebne sile na zanko, ko lepите tkivo.

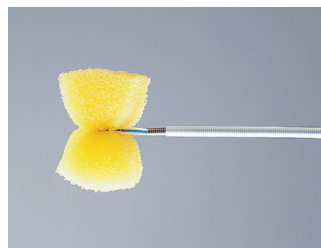

4. Potiskajte drsnik, dokler se ne ustavi, da se kavelj izvleče iz tulca tuljave. Odstranite zanko s kavlja.

Opozorilo: ne snemajte zanke s kavlja, dokler tulec tuljave ni izvlečen iz tulca cevi.





Pozor: proksimalni konec tulca cevi in ročaja držite naravnost ob biopsijskem ventilu endoskopa, potisnite drsnik.

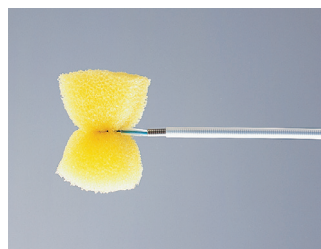

Pripomoček za lepjenje PolyLoop (HX-400U-30)

Kratek referenčni priročnik

Operacija (nadaljevanje)

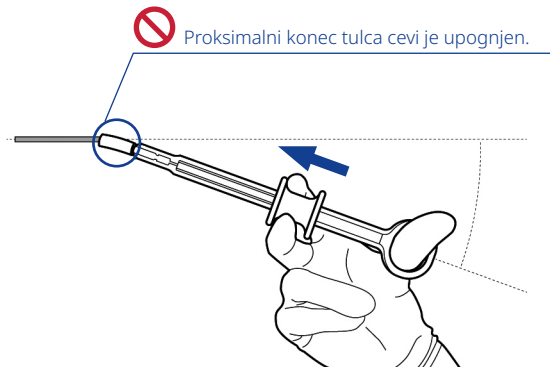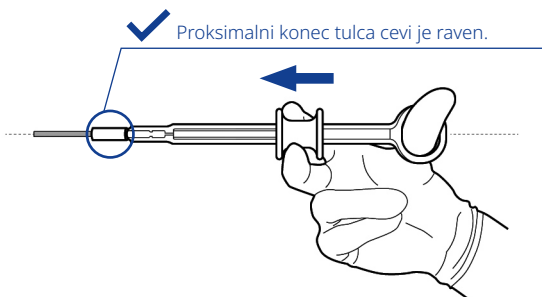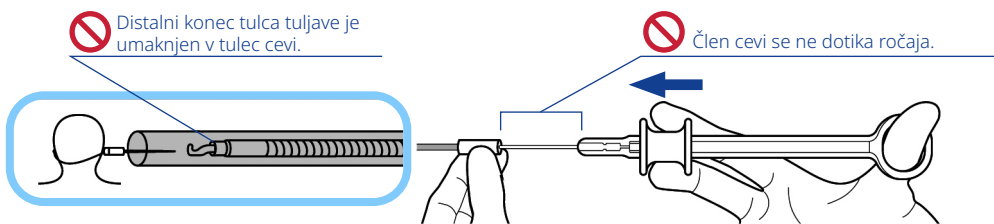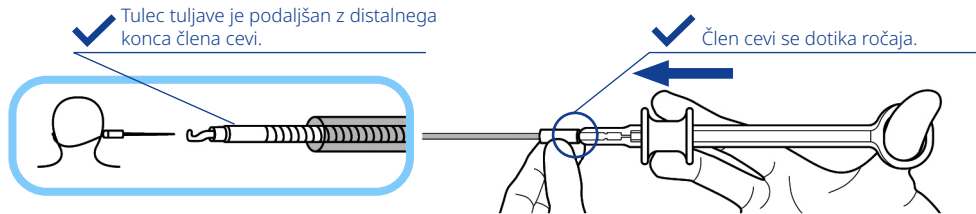

Opomba: vedno imejte pripravljen rezalnik zank, klešče in/ali klešče za rezanje žice Olympus, s katerimi lahko prerežete tulec tuljave, tulec cevi in operacijsko žico, če zanke ni mogoče ločiti od instrumenta.



Pripomoček za lepjenje PolyLoop (HX-400U-30)




Kratek referenčni priročnik

Nujno zdravljenje

Če zanke ni mogoče ločiti od instrumenta, upoštevajte postopke, opisane v tem razdelku.


1. Poravnajte del endoskopa, ki sega iz bolnika.

- Poravnajte del instrumenta, ki sega iz biopsijskega ventila.
- Potiskajte drsnik, dokler se ne ustavi, da se kavelj izvleče iz tulca tuljave.

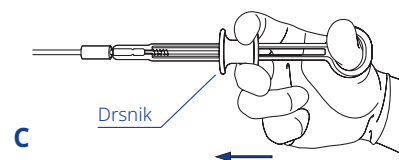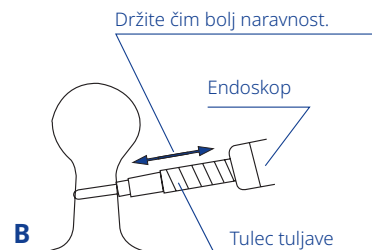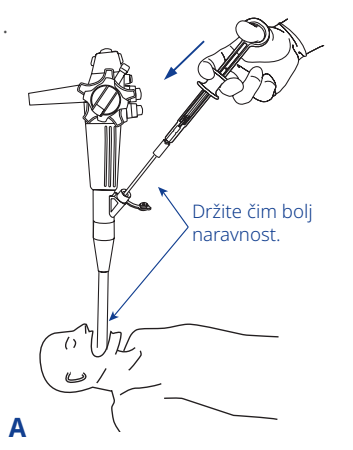


2. S kleščami ali kleščami za rezanje žice prerežite tulec cevi, tulec tuljave in operacijsko žico.

- Umaknite endoskop.

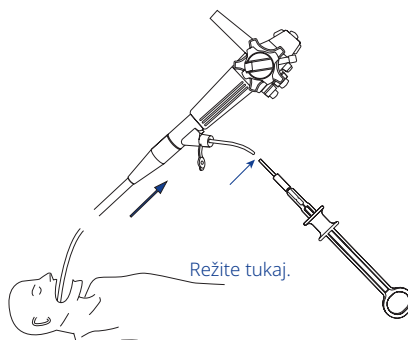

3. Kadar distalni konec tulca tuljave ni blizu ustavljalnika zanke.

- Endoskop ponovno vstavite vzdolž tulca cevi.
- Z rezalnikom zank Olympus odrežite zanko.
- Skupaj izvlecite tulec cevi, tulec tuljave in operacijsko žico.

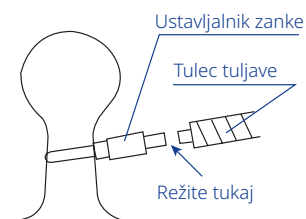

Kadar je distalni konec tulca tuljave blizu ustavljalnika zanke.

- Pustite zanko na mestu, dokler ne pride do nekroze tkiva in se zanka in tkivo sprostita. To lahko traja nekaj časa.
- Izvedite odprto operacijo ali drugo možno zdravljenje.

Ker se medicinsko znanje nenehno širi, bodo morda potrebne tehnične modifikacije ali spremembe dizajna izdelka, specifikacij izdelka, dodatkov in ponudb storitev.